

appliedbiosystems



Applied Biosystems QuantStudio 6/7 Pro

实时荧光定量PCR系统

智慧之选

ThermoFisher
SCIENTIFIC

更可靠的分析结果，更快、更轻松的qPCR分析体验

Applied Biosystems™ QuantStudio™ 6和7 Pro实时荧光定量PCR系统可检测单重分析反应中1.5倍拷贝数差异，获得10 log线性动态范围(图1)。

QuantStudio Pro仪器中的Applied Biosystems™ VeriFlex™ 模块有3个或6个独立的温控区，同时灵活运行多个实验。还具有快速热循环功能，可在30分钟内获取结果。

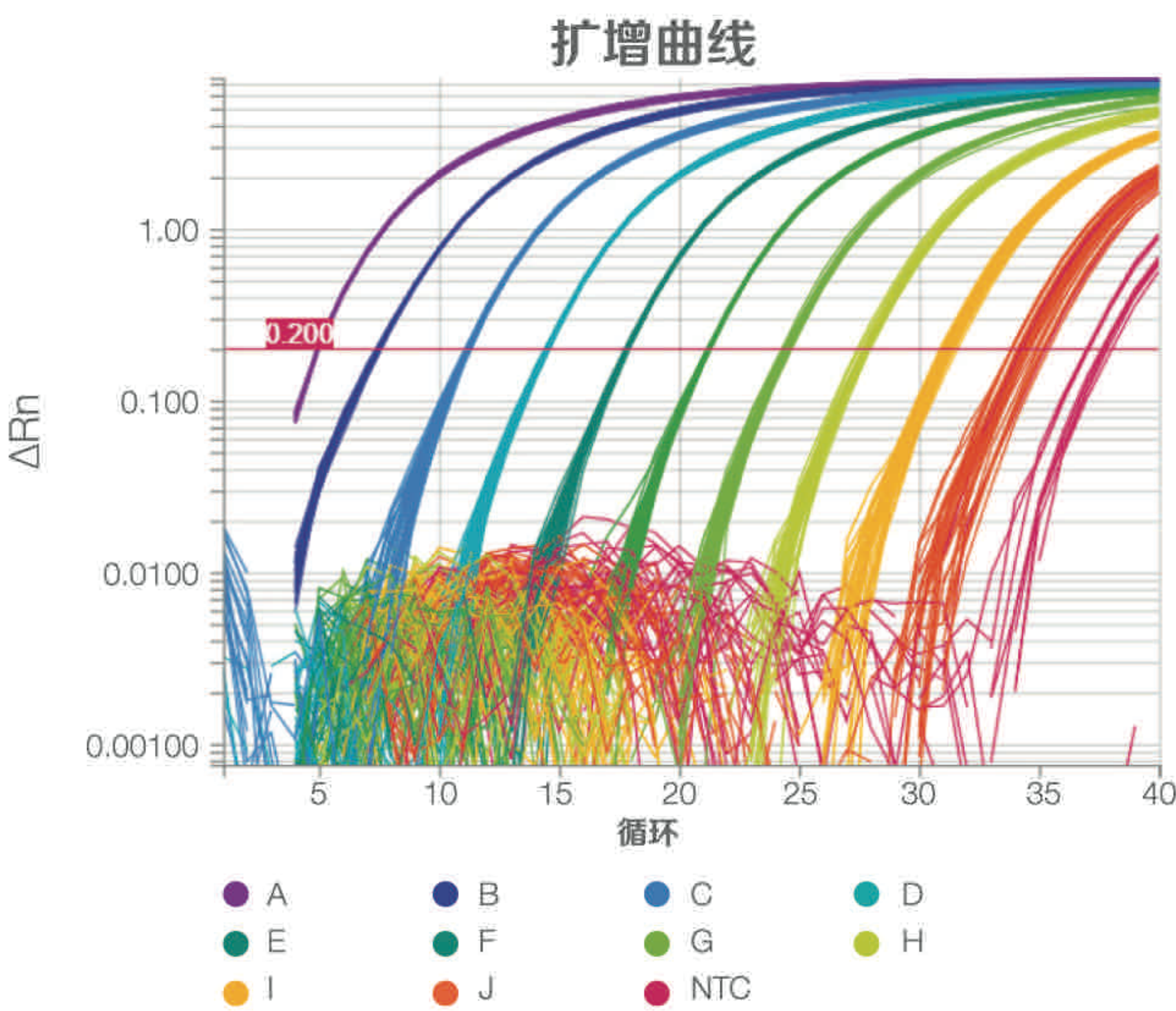


图1. 实时荧光定量PCR的重复性。该图显示了使用384孔模块和Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Advanced预混液，以10倍稀释KAZ质粒DNA扩增获得的结果(A-J: 从A = 10⁹到J = 10⁰，无模板对照(NTC))。数据表明，在10 log起始模板量范围内均可获得高度可重复的结果，说明该系统具有较宽的线性动态范围。

系统对比

将Applied Biosystems™ QuantStudio™ 6和7 Pro实时荧光定量PCR系统实验结果与Applied Biosystems™ 7900HT实时荧光定量PCR系统以及QuantStudio 6和7 Flex系统结果对比后，发现结果类似的。(图2)。

使用QuantStudio 6和7 Pro系统内置软件进行初步分析，结果显示与使用其他QuantStudio仪器获得的分析结果类似(图3)。

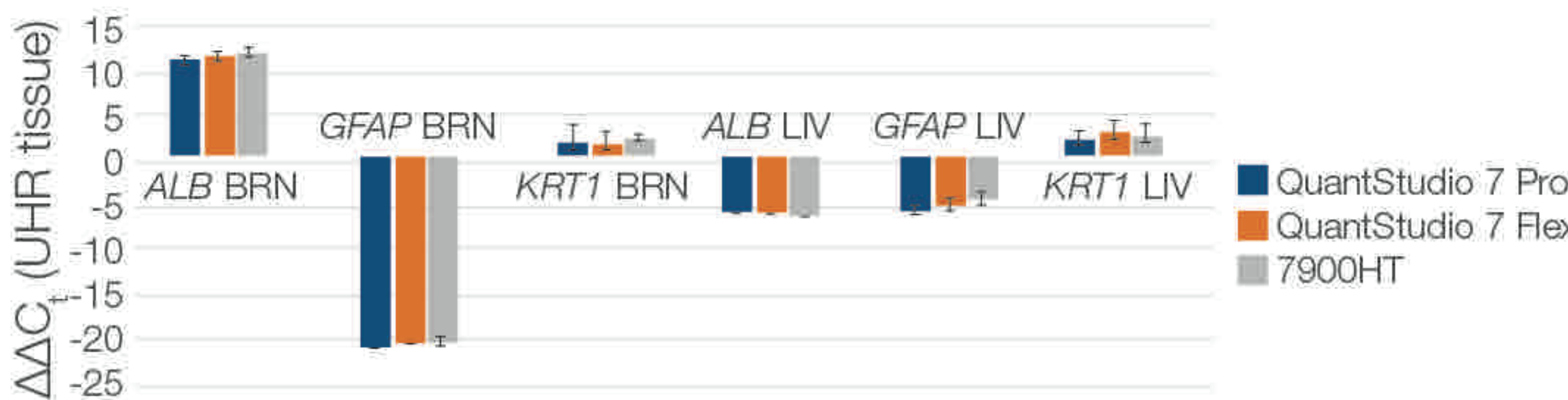


图2. QuantStudio 7 Pro、QuantStudio 7 Flex和7900HT系统之间的 $\Delta\Delta C_t$ 数据对比表明，通用参考RNA、总肝RNA (LIV)和总脑(BRN) RNA逆转录后，cDNA中的GFAP、ALB和KRT1的相对表达水平类似。

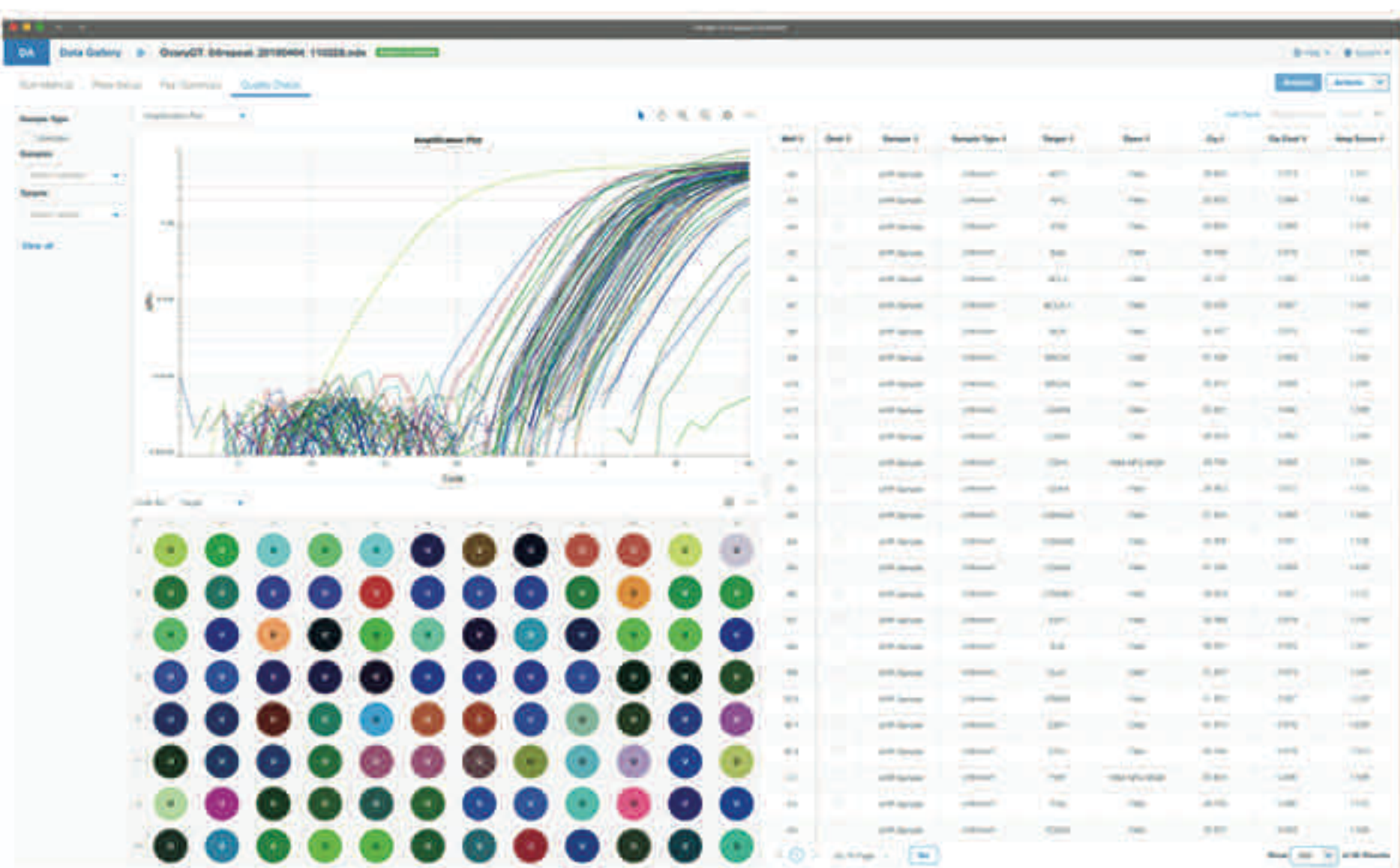


图3. 运行完成后初步分析。运行完成后，显示扩增曲线、分析图以及包括质量控制(QC)警报在内的结果。与其他QuantStudio仪器类似，可以根据需要调整曲线。

qPCR pro的工作日常……

在办公桌前

桌面办公从未如此简单。您可以：


- 规划实验，设计方案，并将它们直接发送至所选择的仪器
- 在办公桌前检索和分析数据；无需转至仪器进行下载或配置专用计算机
- 与现场或远程人员协作
- 检查仪器是否可用，并预定仪器，以获得最佳效率



体积小巧，模块可更换

节省空间，提高孔板形式的灵活性

QuantStudio 6和7 Pro系统可以为您节省实验室工作台空间。

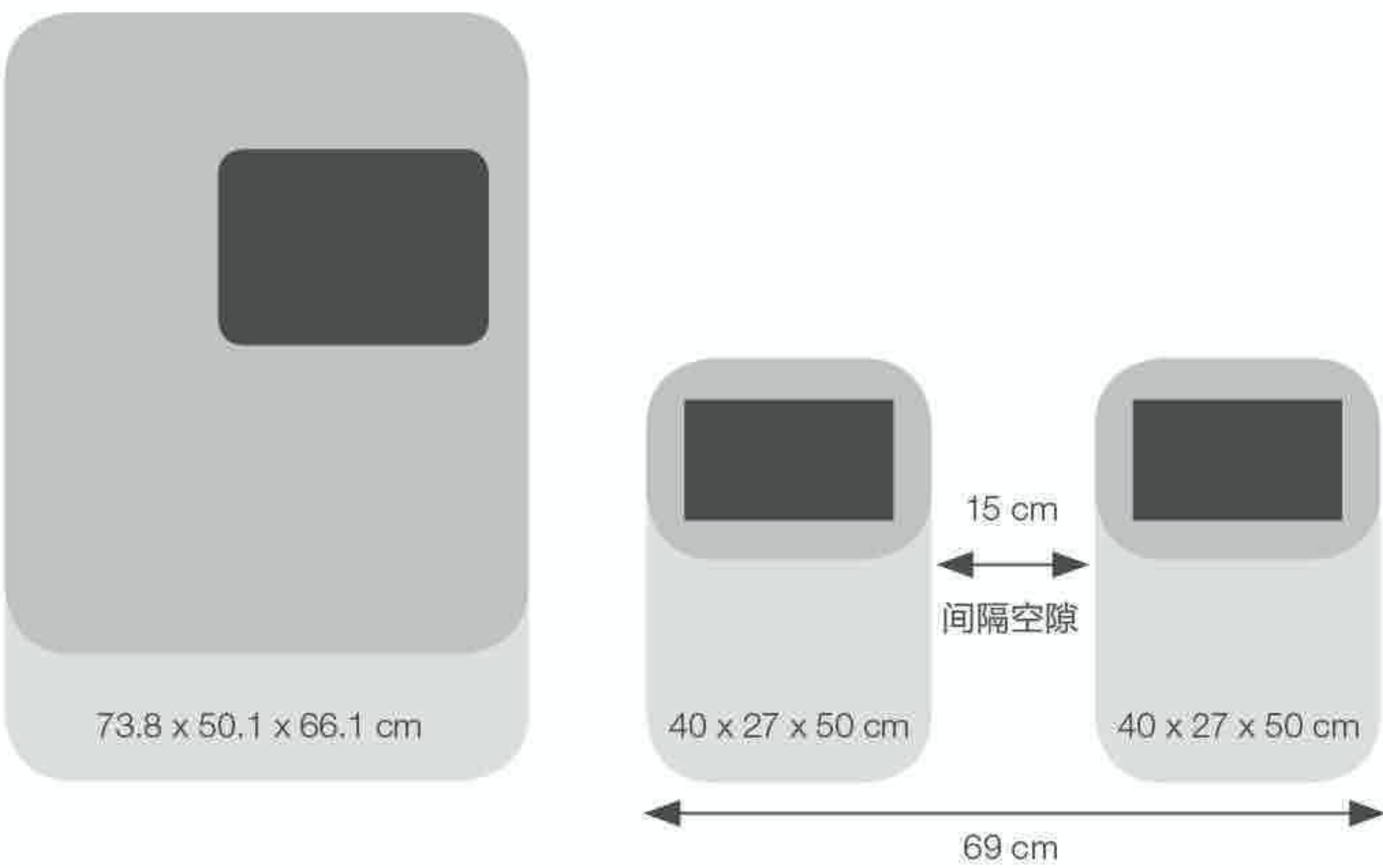


54.7 x 33.8 x 52.5 cm
(H x W x D), 彩色屏幕。


轻松更换模块

通过屏幕操作即可快速、简便地更改模块。

1. 查看当前模块信息。
2. 点击“Change”按钮。

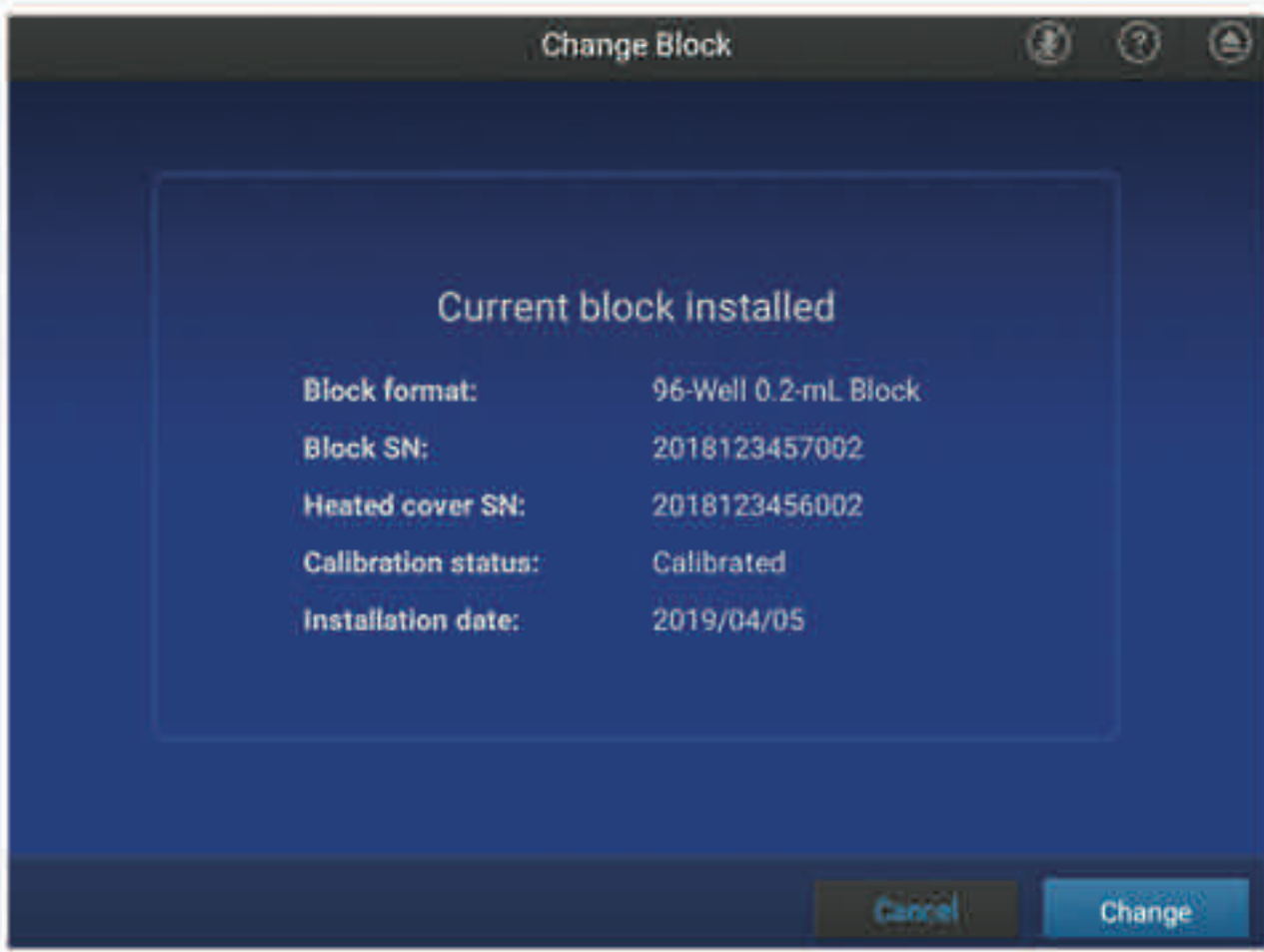

3. 系统将同时释放模块和热盖。
4. 移除模块和热盖。
5. 插入新的模块和热盖。
6. 点击“Install”按钮。

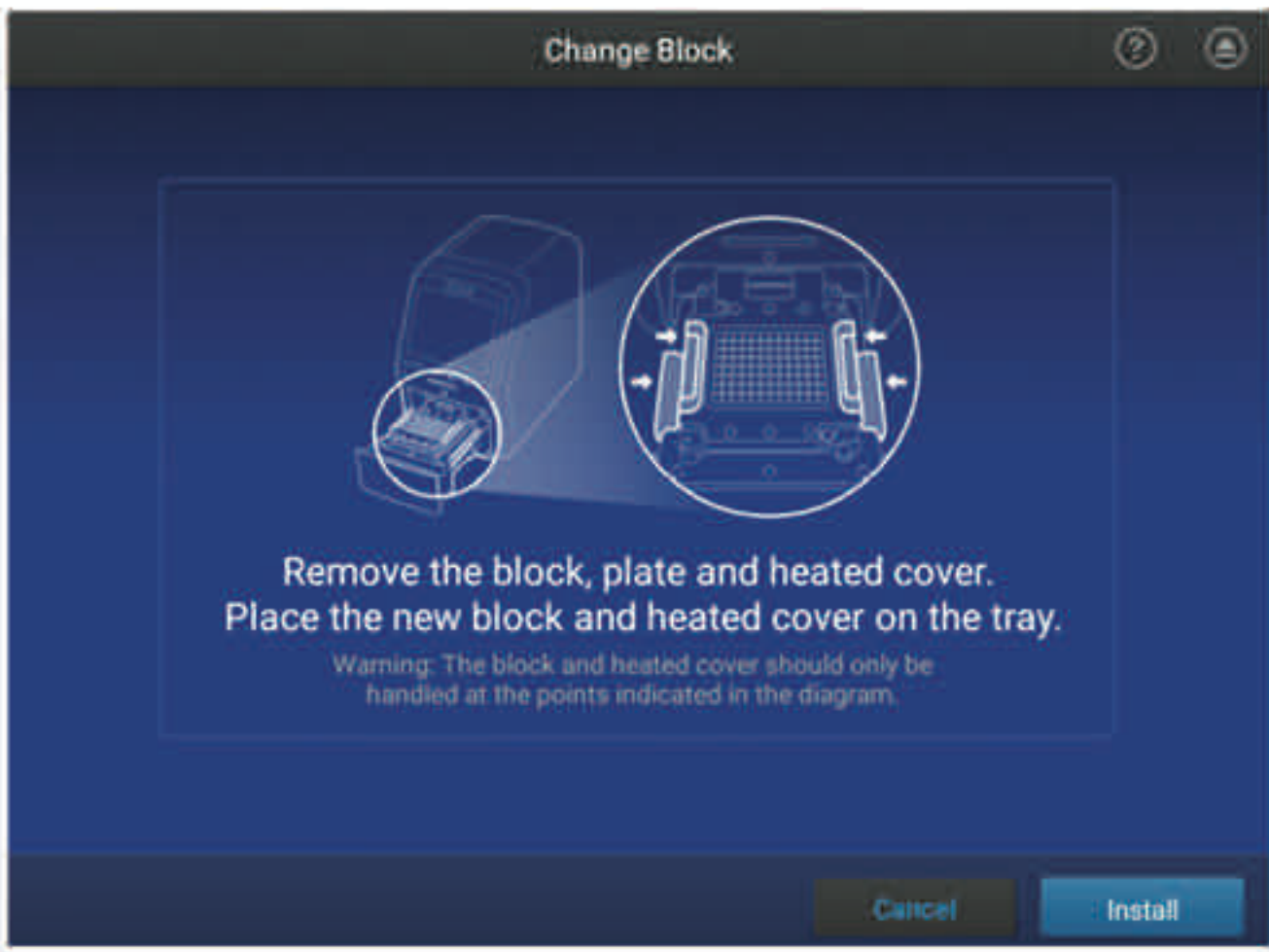

在工作台上

简单、省时、减少错误产生，从而提高工作台操作的效率：


- 使用面部认证技术，不摘手套即可开始使用
- 使用语音命令执行常见任务，例如“Start run”和“Open door”
- 使用带有射频识别(RFID)的Applied Biosystems™ TaqMan™阵列板减少数据输入并简化工作流程
- 点击屏幕更换模块，或通过语音命令更换，先说“Alexa, open Pro instrument”，然后说“Change block”
- 将高品质qPCR数据无缝传送到您的首选目的地



一步操作实现数据快速获取

含RFID的TaqMan阵列板及QuantStudio 6和7 Pro系统的智能功能消除了将检测板布局和Assay信息上传至实验文件中所需的手动操作步骤，改善了用户体验。只需插入检测板，QuantStudio Pro系统即可读取板布局信息。

有关更多信息，访问 thermofisher.com/taqman-rfid

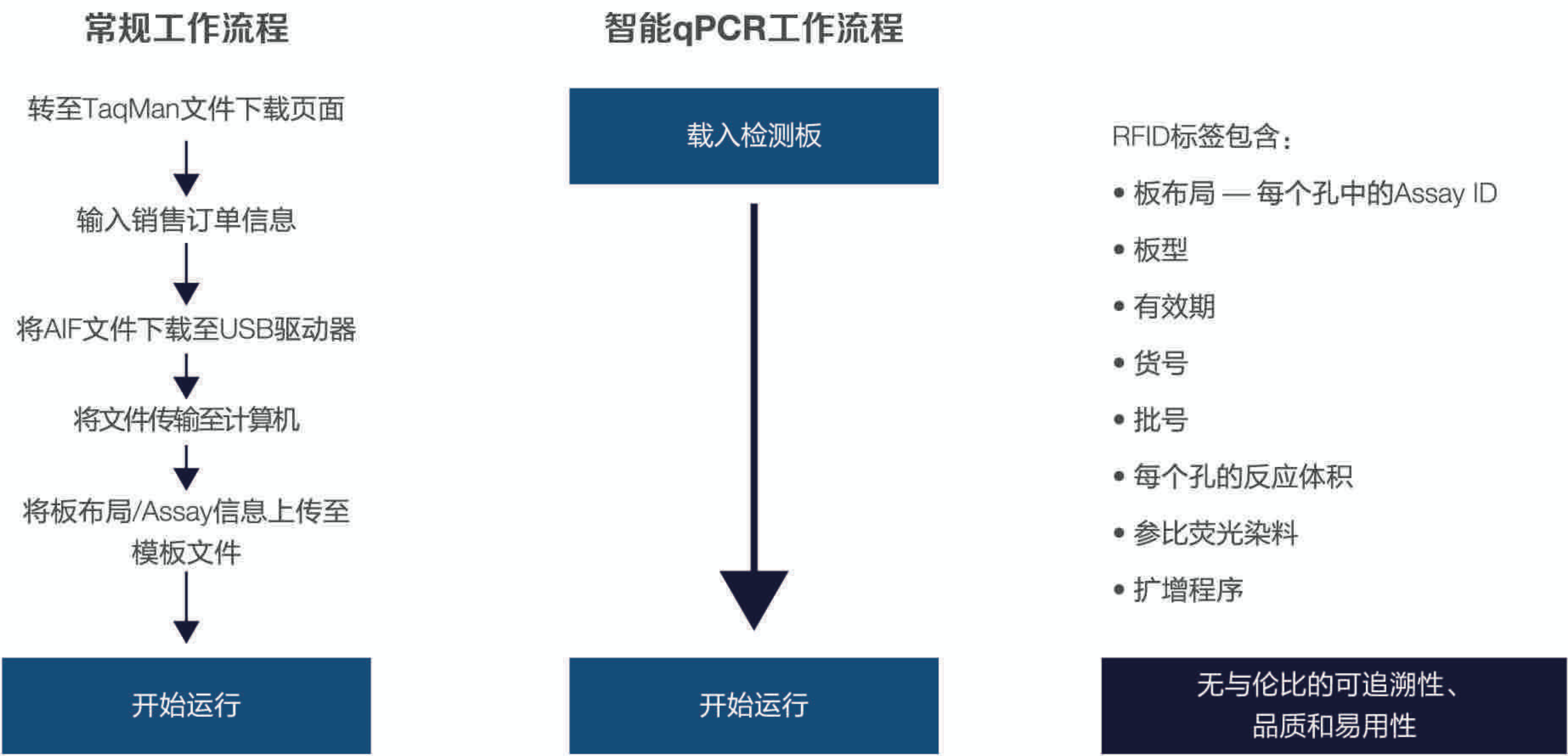

描述	检测数量	样品数量	货号(96孔0.1 mL)	货号(96孔0.2 mL)
带RFID的TaqMan阵列板	N/A	N/A	A43823	
TaqMan阵列, 标准, 96孔板; 8型	8	12	4413263	4413266
TaqMan阵列, 标准, 96孔板; 16/16 Plus型	16	6	4413261/4413262	4413264/4413265
TaqMan阵列, 标准, 96孔板; 32/32 Plus型	32	3	4413259/4413260	4391528/4391529
TaqMan阵列, 标准, 96孔板; 48/48 Plus型	48	2	4413257/4413258	4391526/4391527
TaqMan阵列, 标准, 96孔板; 96/96 Plus型	96	1	4413255/4413256	4391524/4391525

qPCR pro的工作日常……

远程登录

工作间歇或下班后都可轻松查阅实验状态：

- 远程监控实时显示运行状态和扩增曲线
- 即刻规划和安排下一个实验，实现最高工作效率
- 使用基于云的Connect平台进行数据共享和分析
- 成为实验室或任意地方的终极qPCR pro



技术规格



	QuantStudio 6 Pro实时荧光定量PCR系统	QuantStudio 7 Pro实时荧光定量PCR系统
样本数(孔数)	96孔或384孔	
反应体积*	96孔, 0.1 mL 模块: 10-30 µL 96孔, 0.2 mL 模块: 10-100 µL 384孔模块: 5-20 µL	96孔, 0.1 mL模块: 10-30 µL 96孔, 0.2 mL模块: 10-100 µL 384孔模块: 5-20 µL TaqMan阵列卡: ~1.5 µL
激发光源	高亮度白光LED	
滤光片或荧光组合	5色	21种荧光组合
激发/发射波长范围	450–680 nm/500–730 nm	
多通道	5或6个靶标	
最大模块变温速率	96孔, 0.1 mL模块: 9.0°C/sec 96孔, 0.2 mL模块: 6.5°C /sec 384孔模块: 6.0°C/sec	96孔, 0.1 mL模块: 9.0°C/sec 96孔, 0.2 mL模块: 6.5°C/sec 384孔模块: 6.0°C/sec TaqMan阵列卡: 3.0°C/sec
平均样品变温速率	3.66°C/sec	
温度均一性	0.4°C	
温度范围	4–99.9°C	
兼容染料	FAM, SYBR Green, VIC, JOE, TET, ABY, NED, TAMRA, Cy 3, JUN, ROX, Texas Red, Mustang Purple, Cy 5, LIZ, Cy 5.5	
安全、审计和电子签名(SAE)功能	否	是, 无额外费用
自动化兼容性	否	是

* 模块会定期发布; 某些模块当前可能不可用。

有关更多信息和完整客户评价，访问 thermofisher.com/quantstudiopro

用户评价

- “它的体积如此小巧。”

– M. Kublista, 瑞典
- “……是非常简单易用并可单独使用的少数仪器之一。”

– R. Fekete, 美国
- “如果我们之前已经拥有QuantStudio 6 Pro系统，那么早就可以缩短一周的分析时间了。”

– S. Turner, 美国
- “我可以在未在实验室时设置运行程序，然后到实验室直接将检测板放进去运行就可以了。”

– W. Hu, 美国

软件

Applied Biosystems™分析模块是创新的数据分析应用程序，将多个数据集集中在一个方便访问的位置，并以非常好的数据可视化方式呈现数据分析，增强了分析性能并获取了更多信息(图4和5)。

可自定义的QC设置用于支持需要指定QC规则的用户(例如，阴性对照无C_t值；自动应用软件并提醒用户)。

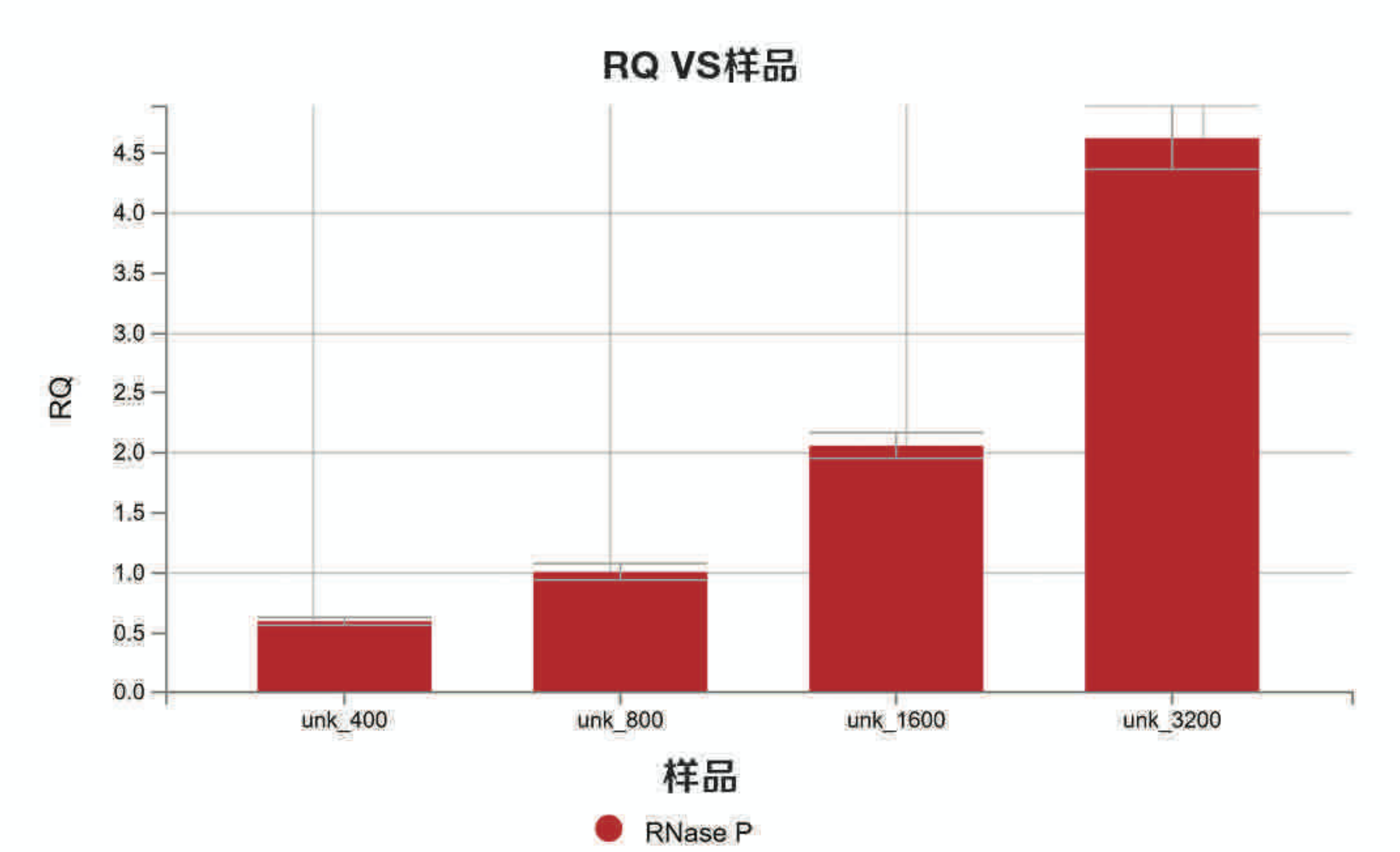


图4. 软件中显示的对比数据。该图表显示了通过设计和分析软件获得结果的双重对比C_t数据。使用RNase P、TaqMan Fast Advanced预混液和Applied Biosystems™ Endura™ 384孔光学板，以10 μL反应体积进行实验。

用户还可以筛选并突出显示特定数据点，并通过软件的关联导航来精确定位所有相应的可视化数据以方便进行交叉检查。



图5. 相对定量。这些图表有助于在设计和分析软件中进行高效数据审查。

QuantStudio 6和7 Pro系统提供了更智能的工作流程体验，特性如下：

个性化 — 自动加载您的系统设置和检测板设置；通过面部认证登录，无需密码。

高效 — 通过语音命令简化了手动操作；通过智能帮助功能联系技术支持专家，更有效地故障排除并提供解决方案，最大限度地延长了正常运行时间；使用智能远程支持协作工具指导您进行远程维修，减少了停机时间；带有RFID的TaqMan阵列板，无需手动操作即可获取仪器上的检测板布局、方案和Assay信息。

简便 — 无需任何工具即可直接更换模块；直接通过触摸屏即可操作，简化了工作流程。

高效 — 内置常用操作的帮助视频；大型触摸屏改进了屏幕角度并可选配Bluetooth™键盘，提高了人体工程学性能；使用基于云的Connect平台随时随地访问数据。

其他

安全、审计和电子签名(SAE)模块

旨在帮助遵循21 CFR Part 11 FDA有关电子记录安全性的准则，并防止未经授权即访问仪器。启用SAE模块可以同时支持单台或多台设备。

- 对每个用户进行身份权限验证，以控制其操作活动
- 通过在仪器以及设计和分析桌面软件中进行追溯，审计所有影响数据的事件
- 允许使用电子签名功能进行数据确认

卓越服务与支持

实验室运行无法突然停工，我们凭借35余年的服务经验，为您提供有助于保持实验室正常运行的维护计划。从安装和操作培训到技术支持，我们1,000多名经过培训的专业人员随时准备为您提供支持。

因为科学研究永不止步。

有关更多信息，访问

thermofisher.com/instrumentservices



自动

通过Thermo Scientific™ Orbitor™ RS2机械臂自动为一个或两个QuantStudio 7 Pro系统加载微孔板，提高了生产率并减少了手动操作。Orbitor RS2机械臂是一款紧凑型台式微孔板移动装置，同时集成条形码扫描功能，提供了更大灵活性、更高样品通量和操作效率。同时，提供了多种配置来满足您的不同需求。

有关更多信息，访问 thermofisher.com/orbitorRS2

塑料耗材

Applied Biosystems™ MicroAmp™ PCR塑料耗材经设计和验证，已与我们的热循环仪结合使用25余年。这就是它们经工程师验证能够实现最佳qPCR结果的原因。

有关更多信息，访问 thermofisher.com/plastics



订购信息

产品	仪器	仪器(含服务)货号*
QuantStudio 6 Pro系统配置		
QuantStudio 6 Pro实时荧光定量PCR系统, 96孔, 0.1 mL模块	A43160	A47200
QuantStudio 6 Pro实时荧光定量PCR系统, 96孔, 0.1 mL模块, 笔记本电脑	A43167	A47202
QuantStudio 6 Pro实时荧光定量PCR系统, 96孔, 0.1 mL模块, 台式机	A43181	A47204
QuantStudio 6 Pro实时荧光定量PCR系统, 96孔, 0.2 mL模块	A43159	A44288
QuantStudio 6 Pro实时荧光定量PCR系统, 96孔, 0.2 mL模块, 笔记本电脑	A43166	A44290
QuantStudio 6 Pro实时荧光定量PCR系统, 96孔, 0.2 mL模块, 台式机	A43180	A44292
QuantStudio 6 Pro实时荧光定量PCR系统, 384孔模块	A43161	A45582
QuantStudio 6 Pro实时荧光定量PCR系统, 384孔模块, 笔记本电脑	A43168	A45584
QuantStudio 6 Pro实时荧光定量PCR系统, 384孔模块, 台式机	A43182	A45586
QuantStudio 7 Pro系统配置		
QuantStudio 7 Pro实时荧光定量PCR系统, 96孔, 0.1 mL模块	A43163	A47201
QuantStudio 7 Pro实时荧光定量PCR系统, 96孔, 0.1 mL模块, 笔记本电脑	A43170	A47203
QuantStudio 7 Pro实时荧光定量PCR系统, 96孔, 0.1 mL模块, 台式机	A43184	A47205
QuantStudio 7 Pro实时荧光定量PCR系统, 96孔, 0.2 mL模块	A43162	A44289
QuantStudio 7 Pro实时荧光定量PCR系统, 96孔, 0.2 mL模块, 笔记本电脑	A43169	A44291
QuantStudio 7 Pro实时荧光定量PCR系统, 96孔, 0.2 mL模块, 台式机	A43183	A44293
QuantStudio 7 Pro实时荧光定量PCR系统, 384孔模块	A43164	A45583
QuantStudio 7 Pro实时荧光定量PCR系统, 384孔模块, 笔记本电脑	A43171	A45585
QuantStudio 7 Pro实时荧光定量PCR系统, 384孔模块, 台式机	A43185	A45587
QuantStudio 7 Pro实时荧光定量PCR系统, TAC**模块	A43165**	A47651
QuantStudio 7 Pro实时荧光定量PCR系统, TAC**模块, 笔记本电脑	A43172**	A47653
QuantStudio 7 Pro实时荧光定量PCR系统, TAC**模块, 台式机	A43186**	A47655

* 扩展保修包包括仪器、SmartStart Orientation和一个1年AB保证计划, 其中包括1次现场计划维护(PM)。若要获取更多信息, 联系您的本地销售代表。

** 某些模块配置可能尚不可用。若要获取完整列表和可用性, 访问 thermofisher.com/quantstudiopro。

订购信息

产品	规格	货号
耗材		
TaqMan Fast Advanced预混液	5 mL	4444557
	50 mL	4444558
PowerTrack SYBR Green预混液	5 mL	A46109
	50 mL	A46113
高容量RNA逆转录cDNA试剂盒	50次反应	4387406
Invitrogen SuperScript IV VILO预混液	500次反应	11756500
仪器认证(OQ)、操作认证(OQ)和仪器性能验证(IPV)服务*		
适用于QuantStudio 6或7 Pro系统(96孔, 0.1 mL模块)的IQ/OQ/IPV服务		A45610
适用于QuantStudio 6或7 Pro系统(96孔, 0.2 mL模块)的IQ/OQ/IPV服务		A44230
适用于QuantStudio 6或7 Pro系统(384孔模块)的IQ/OQ/IPV服务		A45576
适用于QuantStudio 7 Pro系统(TAC模块)的IQ/OQ/IPV服务		A47663

* 若要获取可用性信息, 联系您的本地销售代表。

在紧凑的设计中体验更快、更轻松的qPCR分析。若要了解qPCR的应用前景
请访问 thermofisher.com/quantstudiopro



赛默飞
官方微信



赛默飞
Applied Biosystems
官方微信

免费服务电话: 800 820 8982/400 820 8982
销售服务信箱: sales.china@thermofisher.com
技术咨询信箱: lifescience-cn@thermofisher.com

