


标准化、自动化 循环肿瘤细胞捕获计数平台

CellSearch循环肿瘤细胞检测系统为您提供：

- ✓ 快速、精确、可重复的检测结果
- ✓ 操作简便的技术
- ✓ 半自动和标准化的处理流程以满足实验室需求

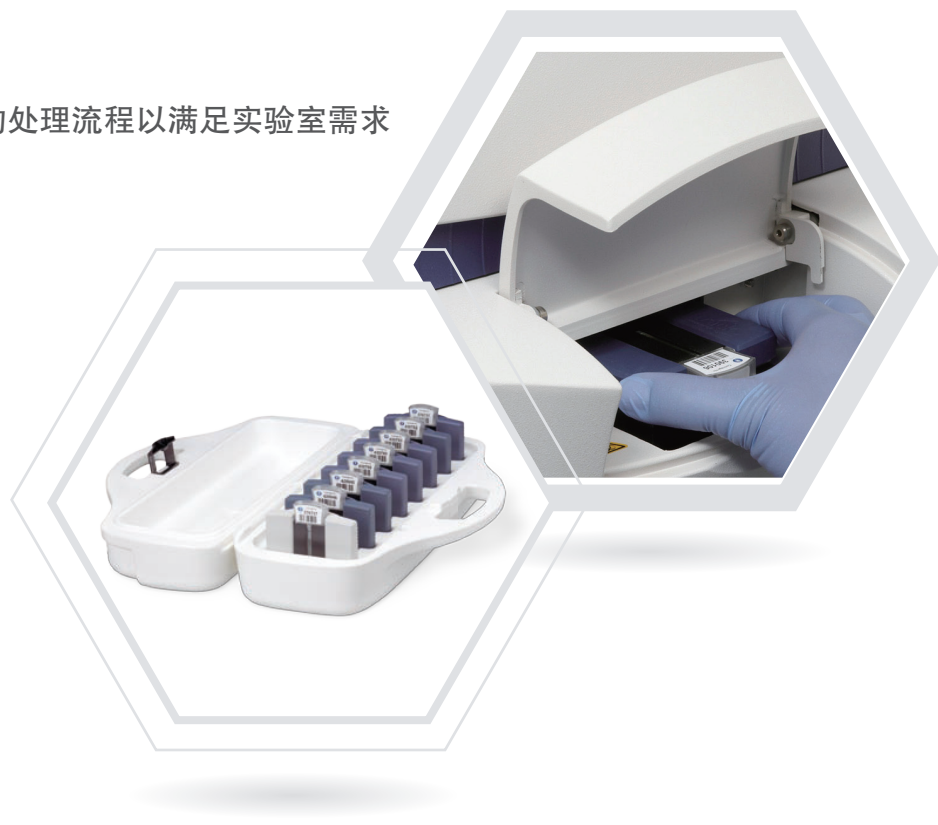

PM code: 0906JD5208

标准化、自动化 循环肿瘤细胞捕获计数平台



功能强大的创新性诊断平台

CellSearch系统是一种先进的诊断平台，能够运用专利免疫磁颗粒技术对循环肿瘤细胞进行检测。该系统能够对上皮来源的循环肿瘤细胞进行精确、可重复的分析。

CellSearch CTC检测系统的先进技术能够在7.5ml全血中检测到低至1个循环肿瘤细胞。

... CellTracks® AutoPrep®系统



Cell Search

Circulating Tumor Cell Test


... CellTracks Analyzer II®



能够优化实验室工作流程

CellSearch系统实现对CTC进行半自动化、标准化分析，操作流程简单至仅需三步。

1
Step

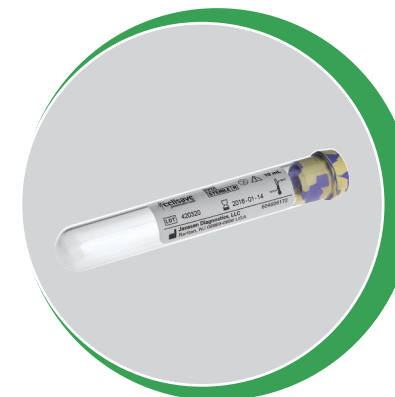


样本采集

CellSave血样本储存管

- 使用经优化的细胞保护剂进行简便的样本采集
- 室温条件下，样本可储存长达96小时，可实现批量处理及远程运输

2
Step

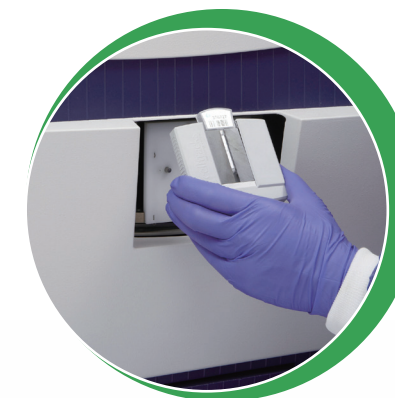

样本制备

CellTracks® AutoPrep®系统

- 全自动、可重复的样本制备过程，提高结果的准确性

3
Step



样本分析

CellTracks Analyzer II®

- 能够对样本进行快速的半自动化分析

CellSave血样本储存管

经专门设计的CellSave血样本储存管，用于采集具有易损性的CTC细胞，从而提高了分析的可重复性和可靠性。CellSave血样本储存管内装有细胞保护剂，能够：

- 确保CTC细胞能够在室温条件下稳定保存长达96小时，有助于对样本进行批量处理，并可实现样本长途运输



CellTracks® AutoPrep® 系统

通过使用免疫磁性细胞捕获、富集和荧光染色方法，CellTracks® AutoPrep® 系统能够实现复杂样本处理流程的自动化和标准化。


- 软件分析程序便于使用，可对多达8份样本进行批量处理，实现无人值守
- 极大的减少了人工操作时间和脱机处理程序
- 通过传感器实现分析过程中样本及试剂的多点检测，以确保结果的可靠性
- 能够自动监测白膜层，从而将过量的血浆转移进入废物桶



CellTracks Analyzer II®

CellTracks Analyzer II®是一种半自动荧光光学系统，可对经过免疫磁性分选的循环肿瘤细胞进行计数和分析。

- 友好的基于Linux的用户界面
 - 简单的屏幕指令
 - 直观的数据结构
 - 可分类和导出的统一格式表格
- 快速分析
- 全自动扫描
- 全自动背景分析功能
- 质控数据分类
- 通过对整个样本盒进行分析，能够提供真正的定量检测结果，并以图库形式呈现备选的荧光检测图像，便于用户进行最终分类
- 可通过DVD光盘长期储存结果图像

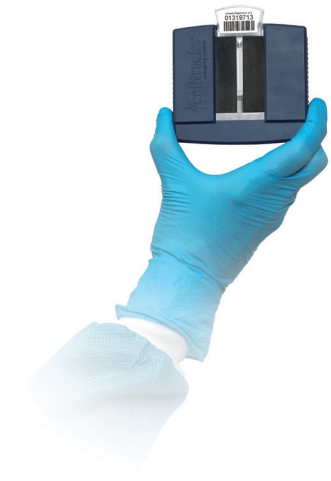

CellSearch体外诊断 (IVD) 检测试剂盒

- CellSearch循环肿瘤细胞试剂盒包含循环肿瘤细胞的捕获试剂和免疫荧光染色剂
- 试剂盒还包含CellTracks® 样本盒，用于在CellTracks II® 分析仪上进行循环肿瘤细胞分析及用于样本制备的锥形管
- 试剂盒可进行16次检测



独特优势



CellSearch

系统参数



CellTracks® AutoPrep® 系统规格

尺寸和重量

68英寸(宽)×27英寸(深)×27英寸(高)

电源规格

额定电压 100–240伏交流电 ± 10%
额定频率 50–60赫兹
额定功率 400瓦
输入保护 T5A保险丝

环境要求(仅适合在室内使用)

操作环境 室温65–90°F, 18–32°C
温度 20%–80%相对湿度
海拔 高达2000米(6562英尺)
过压类别 II类, 与分流电路连接
污染 II级, 正常室内环境

计算机接口选项规格

以太网端口 10/100 Base-T
RS232端口 Serial D89
鼠标PS/2

认证标准

依照UL61010A-1,
CSA C22.2要求进行测试
编号1010-1和EN61010
通过UL公司的检测和认证

电磁兼容标准

依照EN61326-1进行检测, 结果符合欧盟电磁兼容性指令的A类要求
依照FCC CFR 47第15部分B条进行检测, 结果符合A类要求

CellTracks Analyzer II® 规格

尺寸和重量

工作台必须能够至少承重1000磅(454千克)
工作场所应当水平、无震动、无尘
分析仪: 16.0(高)×28.7(宽)×24.6英寸(深)英寸(40.6×73.0×62.6厘米)
工作高度30英寸/76.2厘米
计算机: 18.5(高)×6.5(宽)×19.0英寸(深)英寸(47.0×16.5×48.3厘米)
显示器: 17.0(高)×20.0(宽)×5.0英寸(深)英寸(43.2×50.8×12.7厘米)
UPS电源: 8.8(高)×8.4(宽)×19英寸(深)英寸(22.4×21.3×48.3厘米)

电源规格

额定电压 100–240伏交流电 ± 10%
额定频率 50–60赫兹
额定功率 400VA
输入保护 2 T4A保险丝
(100–240伏交流电)

环境要求 (仅适合在室内使用)

操作温度 室温65–90°F, 18–32°C
湿度 20%–70%相对湿度
海拔 高达2000米 (6562英尺)
过电压类别 II类, 与分流电路连接
污染 II级, 正常室内环境

认证标准

依照EN61010进行检测, 结果通过UL公司的认证

电磁兼容标准

依照EN61326进行检测, 结果符合欧盟电磁兼容性指令、
FCC和CE规定的A类要求

光学规格

DAPI 365/15BP 405LP FITC 475/25BP 510 /20BP
PE 545/15BP 580/25BP APC 620/30BP 680/50BP

