

专为您设计的qPCR

QuantStudio™ 实时荧光定量PCR和
数字PCR系统



Applied Biosystems®

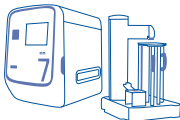
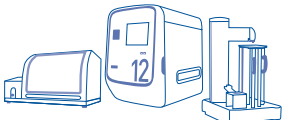
life
technologies™

每个实验室都是独一无二的，所以您值得拥有一款最适合您需要的PCR平台。也许您期望在有限的预算下实现通用性或者利用少量样本获得可靠的结果。也许您需要高通量使产率最大化或者需要绝对定量结果让您的工作进入一个新阶段。不论您需要什么，都有适合您研究的QuantStudio™ qPCR系统。



您的研究、您的方式。

QuantStudio™ 实时荧光定量PCR和数字PCR系统

	仅实时荧光定量PCR		实时荧光定量和数字PCR	仅数字PCR
	 QuantStudio™ 6 Flex	 QuantStudio™ 7 Flex	 QuantStudio™ 12K Flex	 QuantStudio™ 3D
价格	\$\$	\$\$\$	\$\$\$\$	\$
颜色	5种颜色	6种颜色 (21种滤光片组合)	6种颜色 (21种滤光片组合)	2种颜色 (终点检测)
化学原理	SYBR®, TaqMan®	SYBR®, TaqMan®	SYBR®, TaqMan®	仅 TaqMan®
可提供的加热模块	96孔 96孔快速 384孔	96孔 96孔快速 384孔 TaqMan® Array Card (384孔微流体芯片)	96孔 96孔快速 384孔 TaqMan® Array Card (384孔微流体芯片) OpenArray® (3,072个通孔)	20,000份/芯片
提供自动化操作	否	是	是	否
通量	***	****	*****	*
加热模块更换	前侧模块更换只需不到1分钟；无需工具			不适用
遵循21 CFR p11标准	提供可选的软件模块			不适用
远程监控	可同时监控多达15台联网仪器			不适用
直观的触摸屏	是	是	是	是
主要应用	• 基因表达 • miRNA图谱分析 • SNP基因分型 • 拷贝数变异 • Protein Thermal Shift • 高分辨率熔解曲线 • 病原体检测	• 基因表达 • miRNA图谱分析 • SNP基因分型 • 拷贝数变异 • Protein Thermal Shift • 高分辨率熔解曲线 • 病原体检测	• 基因表达 • miRNA图谱分析 • SNP基因分型 • 拷贝数变异 • Protein Thermal Shift • 高分辨率熔解曲线 • 病原体检测 • 药物基因组学 • 数字PCR	• 分子标准品定量 • 绝对定量 • 病原体检测 • 载量测定 • 拷贝数变异 • 数字PCR

我需要提升的空间

满足今天、明天甚至未来的灵活性需要。

QuantStudio™ 6 Flex 实时荧光定量PCR系统

QuantStudio™ 6 Flex实时荧光定量PCR系统适合从事多个应用领域的实验室或预算有限的最终用户使用。QuantStudio™ 6 Flex系统可升级为QuantStudio™ 7 Flex系统，从而具有自动化或TaqMan® Array Card特性，如果您将来需要更换系统，QuantStudio™ 6 Flex系统不失为理想的qPCR平台。

主要优点

灵活性，使前期资金投入最小化

您只需一台仪器即可在96孔、96孔快速或384孔形式之间更换。

操作简便

直观的软件、简单的触摸屏设置以及轻松的加热模块更换，使您可以立刻上手操作。

值得您信赖的性能

检测出单重反应中低至1.5倍的变化，10x动态范围。

在您需要时实现升级

现场服务工程师可以将QuantStudio™ 6 Flex系统无缝升级至QuantStudio™ 7 Flex，为您提供更高层次的自动化、通量和多重分析性能。

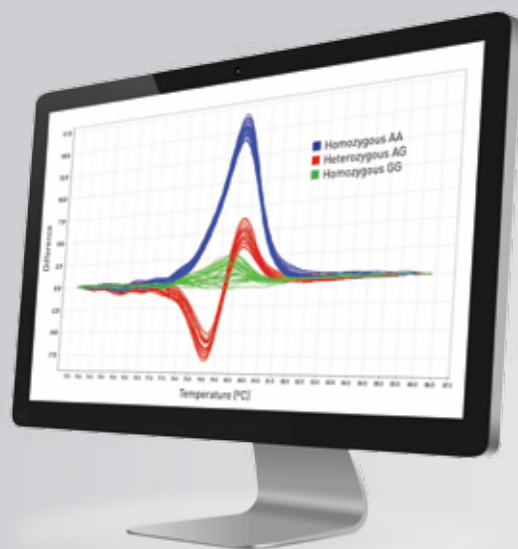
应用聚焦

利用高分辨率熔解曲线快速且准确地鉴别更多的新变异体

高分辨率熔解曲线 (HRM) 分析的核心是检测PCR熔解 (解离) 曲线上的微小差异。这是借助改进的dsDNA结合染料和实时荧光定量PCR仪实现的，后者可精确控制温度变化，且具备高级数据采集功能。采用QuantStudio™ 6 Flex系统和384孔加热模块及MeltDoctor™ 软件、内置实验方案和校准，可实现高通量HRM分析。

HRM 的优势

- 低试剂和样本消耗
- 快速简单的工作流程
- 无需热学优化



QuantStudio™ 6 Flex 实时荧光定量PCR系统
价格实惠，且具有灵活性。



我需要更高的通用性

不同应用之间的切换变得更为简单，具有不同染料、形式和自动化应用的潜能。

QuantStudio™ 7 Flex 实时荧光定量PCR系统

QuantStudio™ 7 Flex实时荧光定量PCR系统一如既往地提供了ViiA™ 7系统所具备的可靠性能、灵敏度和准确性，并采用全新的工业设计。QuantStudio™ 7 Flex系统适合最广泛的定量PCR应用。

主要优点

更快速地获得更多结果

采用TaqMan® Array微流体芯片和Twister® 机器人可轻松运行数百个实时荧光定量PCR反应。QuantStudio™ 7 Flex系统可在自动化条件下使您的通量性能最大化。

高应用多样性

优化的实验方案和试剂及直观的软件可满足最广泛的应用要求，包括：

- 基因表达
- 长链非编码RNA分析
- Pri-miRNA分析
- 突变检测
- 高分辨率熔解曲线
- SNP基因分型
- MicroRNA表达谱分析
- Protein Thermal Shift

获得值得您信赖的结果

OptiFlex™系统带有6个可自由组合的激发光和检测光通道，支持21种滤光片组合，可实现最大程度的多重反应能力和化学试剂灵活性，提升了孔间和仪器间的数据准确度。

应用聚焦

与免疫应答有关的全新通路的鉴别

TaqMan® Human Immune Array Card是一款经济高效且使用方便的微流体芯片，适用于与免疫应答有关的靶点的定量基因表达分析。TaqMan® Human Immune Array Card基因靶点包括细胞因子、趋化因子、生长因子、免疫调节剂、细胞凋亡标志物、缺血标志物、组织特异性标志物及包括经典内源性标志物在内的其他靶点。该产品经济高效且方便使用，且无需昂贵的机器人。这使得我们能够在不同样本、研究和实验室之间获得可重复性和一致性的结果——提供了相同的芯片间和批次间数据质量——即便是不同操作人员获得的结果。我们提供了数百种可定制和预定义的TaqMan® Array微流体芯片，包含使用方便的预加载TaqMan® Gene Expression或MicroRNA Assay。



利用 QuantStudio™ 7 Flex 实时荧光定量PCR系统的应用多样性进一步推动您的研究。



我需要最高的产率

利用高通量技术轻松实现产率最大化。

QuantStudio™ 12K Flex 系统

QuantStudio™ 12K Flex系统加快了许多高通量研究应用的发展，如：

- 药物开发
- 药物靶点验证
- MicroRNA表达谱分析
- 农业分子检测

主要优点

利用较低的成本实现微型化

OpenArray®技术是一种应用范围极广的纳升流体技术平台，可用于超小体积液相反应，同时降低了试剂和分析成本，实现了快速的并行处理。

无与伦比的通量

利用OpenArray®模块和一台GeneAmp® 9700 PCR仪，可在8小时工作日内生成110,000个甚至更多数据点。此外，当配备有OpenArray®模块、Twister®自动化机器人和几台GeneAmp® PCR系统9700 PCR仪时，您每天能够分析超过200万个数据点。

从qPCR到数字PCR的无缝转换

利用QuantStudio™数字PCR试剂盒和DigitalSuite™软件及OpenArray®模块，您可以在实时荧光定量PCR和数字PCR应用之间切换，提高您的实验精度和灵敏度。

更高的数据完整性和质量控制 —— 值得您信赖的结果

整合样本追踪特性和安全、审计和电子签名(SAE)模块，帮助遵循21 CFR part 11的要求。

应用聚焦

药物基因组学

药物基因组学是在独特的个性化基因组组分的基础上了解药物功效。QuantStudio™ 12K Flex系统和OpenArray® 技术提供了简单、经济高效且快速的筛选工作流程。



采用QuantStudio™ 12K Flex实时荧光定量PCR系统和OpenArray®技术，一位用户单次运行可生成1至12,000个数据点，且操作时间极短。



我需要绝对的结果

利用创新的技术帮助您进一步深入研究。

QuantStudio™ 3D 数字PCR系统

QuantStudio™ 3D数字PCR系统采用了高密度的纳升流控芯片技术，可用于小概率事件检测、两个靶点间的低倍数差异分析或样本中精确的靶点计数。由于数字PCR具有更高的精度、灵敏度和绝对性质，因此适用于下列应用领域：

- 用于传统实时荧光定量PCR实验的分子标准品定量
- 病原体检测和载量测定
- 稀有靶点检测，如肿瘤学研究中的体细胞突变检测
- GMO检测和污染评估
- 参照品和标准品生成
- 拷贝数变异

主要优点

简单的工作流程

简化的工作流程及最少的样本处理步骤可实现一站式处理。只需加载并读数即可。

经济实惠

价格不到其他平台的一半，使得几乎所有实验室都可以应用全新的数字PCR技术。

绝对定量

20,000个反应孔，可生成高精度和高灵敏度的数据(拷贝/μL)，且无需标准曲线。

密封系统

采用密封芯片和非暴露的样本转移步骤，污染物较少。

可任意运行实验

每块芯片都可以单独运行，没有单次运行最低样本数量限制。

空间要求低

体积小 [7" X 5" X 9"]，可放置在几乎所有实验台上，且需要时可随时移动。

兼容

使用您现有的TaqMan® Real-Time Assay即可获得数字结果。

应用聚焦

可疑组织中的低拷贝数水平测定

许多癌症受特定基因、基因组或拷贝数变化突变调控。这些变化与疾病的侵袭性或预后相关。数字PCR提供了一种快速且简单的工作流程，可精确鉴定低拷贝数水平的微小倍数差异。相比原位杂交荧光免疫组化，数字PCR受组织异质性的影响较小，可提供更明确的结果。



采用QuantStudio™ 12K Flex实时荧光定量PCR系统和OpenArray®技术，一位用户单次运行可生成1至12,000个数据点，且操作时间极短。



其他实时荧光定量PCR解决方案



您在一家临床实验室

QuantStudio™ Dx仪器可为您的临床实验室提供值得信赖的性能、您所需的安全性以及工作流程所需的灵活性。如需了解QuantStudio™ Dx实时荧光定量PCR系统的更多信息，请登录 www.lifetechnologies.com/quantstudiodx

您是qPCR新手

StepOne™ 和StepOnePlus™ 实时荧光定量PCR仪是一款操作极其简单且价格较低的系统，可获得高质量的结果。它采用了易于使用但功能强大的用户界面设计，适合新从事实时荧光定量PCR的研究人员使用。如需了解更多信息，请登录 www.lifetechnologies.com/steponeplus



您拥有已经过验证的实验方案

7500和7500 Fast实时荧光定量PCR系统以可靠的性能著称于世，已经过验证适用于身份鉴定、食品检测和动物健康研究应用领域。如需了解更多信息，请登录 www.lifetechnologies.com/abqpcr

分析软件

Applied Biosystems® 提供了用于实时荧光定量PCR和数字PCR应用的初步和二次分析软件。

软件及描述	QuantStudio™ 6 Flex	QuantStudio™ 7 Flex	QuantStudio™ 12K Flex	QuantStudio™ 3D
QuantStudio™ 6/7 软件	•	•		
QuantStudio™ 12K Flex 软件			•	
利用Sample Tracker软件可方便地将96孔到384孔的追踪结果映射至OpenArray® 芯片			•	
适用于96孔和384孔加热模块的HRM软件模块	•	•	•	
21 CFR Part 11软件模块可帮助实现安全、审计和电子签名记录	•	•	•	
ExpressionSuite™ 软件可实现更强的基因表达分析	•	•	•	
Genotyper™ 软件适用于SNP基因分型数据分析	•	•	•	
DigitalSuite™ 软件可从实时荧光定量切换至数字PCR数据分析			•	
QuantStudio™ 3D AnalysisSuite™ 软件用于数据QC和多芯片分析				•
Protein Thermal Shift™ (PTS) 软件	•	•	•	

实时荧光定量PCR应用领域

实时荧光定量PCR可用于核酸靶点的灵敏且特异性的检测和定量。我们已经开发出了功能强大的分析设计算法、优化的预混液、直观的数据分析软件和灵活的仪器，帮助您将qPCR应用于各个不同的领域。探索qPCR研究解决方案。

传染病研究

了解我们不断增加的灵敏且特异性的实时荧光定量PCR探针和引物组产品，用于人类病毒及其他传染病研究。

食品病原体检测

在一次运行中检测多种细菌，包括沙门菌、螺旋杆菌、大肠杆菌O157:H7和李斯特菌。

水生病原体检测

检测并监控景观和饮用水源中的水生病原体。

药物分析学

检测药物、化妆品和个人护理产品生产中的支原体、病毒和宿主细胞残留污染。

植物科学和农业生物技术

为植物研究设计的仪器、试剂及试剂盒将帮助您在农业领域收获下一波举世瞩目的发现 — 从能够养活更多人的改良作物到可持续性生物燃料。

干细胞研究

用于干细胞分析、干细胞性测定及干细胞基因调控和翻译研究的解决方案。

药物基因组学

针对逾175个ADME和CYP靶点的预设计TaqMan® Assay，包括>95%的ADME核心标志物和华法林代谢检测板。

肿瘤学和遗传疾病研究

癌症相关标志物和遗传疾病的稳定、可靠的检测及定量。

用于实时荧光定量PCR的TaqMan® 化学反应和SYBR® Green I 化学反应

Life Technologies可提供两种采用实时荧光定量PCR仪检测PCR产物的化学反应技术：

- TaqMan® Assay化学反应（又被称为5'核酸酶荧光化学反应）
- SYBR® Green I染料化学反应

	基于TaqMan® Assay的检测	基于SYBR® Green的检测
化学反应概述	利用荧光探针检测PCR循环过程中积聚的特定PCR 物	SYBR® Green 1或类似染料：一种可与双链DNA结合的染料，可检测PCR循环过程中积聚的PCR产物

	TaqMan® Assay试剂	SYBR® Green试剂
特异性	高	低
灵敏度 — 低拷贝	高	可变*
重复性	高	可变*
多重分析	是	否
预设计分析	是	否
定制分析	是	否
用户设计与优化	否	是
成本	高	低*
基因表达定量	高	低
DNA定量	是	是（病原体检测）
CHIP	是	是
SNP基因分型	是	否
microRNA	是	否
拷贝数	是	否
体细胞突变检测	是	否
通路分析	是	否
数字PCR	是	否

* 取决于模板质量和引物设计及优化情况

订购信息

QuantStudio™ 6 Flex配置	部件号
QuantStudio™ 6 Flex, 96孔仪器, 笔记本电脑配置	4485689
QuantStudio™ 6 Flex, 96孔快速仪器, 笔记本电脑配置	4485699
QuantStudio™ 6 Flex, 384孔仪器, 笔记本电脑配置	4485691
QuantStudio™ 6 Flex, 96孔仪器, 台式电脑配置	4485692
QuantStudio™ 6 Flex, 96孔快速仪器, 台式电脑配置	4485697
QuantStudio™ 6 Flex, 384孔仪器, 台式电脑配置	4485694
QuantStudio™ 6/7 Flex, 96孔加热模块升级版试剂盒	4453543
QuantStudio™ 6/7 Flex, 96孔快速加热模块升级版试剂盒	4453544
QuantStudio™ 6/7 Flex, 384孔加热模块升级版试剂盒	4453545

QuantStudio™ 7 Flex配置	部件号
QuantStudio™ 7 Flex, 96孔仪器, 笔记本电脑配置	4485688
QuantStudio™ 7 Flex, 96孔快速仪器, 笔记本电脑配置	4485698
QuantStudio™ 7 Flex, 384孔仪器, 笔记本电脑配置	4485695
QuantStudio™ 7 Flex, TAC仪器, 笔记本电脑配置	4485700
QuantStudio™ 7 Flex, 96孔仪器, 台式电脑配置	4485690
QuantStudio™ 7 Flex, 96孔快速仪器, 台式电脑配置	4485693
QuantStudio™ 7 Flex, 384孔仪器, 台式电脑配置	4485701
QuantStudio™ 7 Flex, TAC仪器, 台式电脑配置	4485696
QuantStudio™ 6/7 Flex, 96孔加热模块升级版试剂盒	4453543
QuantStudio™ 6/7 Flex, 96孔快速加热模块升级版试剂盒	4453544
QuantStudio™ 6/7 Flex, 384孔加热模块升级版试剂盒	4453545
QuantStudio™ 7 Flex, TAC加热模块升级版试剂盒	4453546
QuantStudio™ 12K Flex, 自动化机器人	4471066

QuantStudio™ 12K Flex配置	部件号
QuantStudio™ 12K Flex, OpenArray® 加热模块 (包括 AccuFill™系统), 笔记本电脑配置	4471086
QuantStudio™ 12K Flex, OpenArray® 加热模块 (不包括AccuFill™系统), 笔记本电脑配置	4472379
QuantStudio™ 12K Flex, 96孔仪器, 笔记本电脑配置	4471050
QuantStudio™ 12K Flex, 96孔快速仪器, 笔记本电脑配置	4471080
QuantStudio™ 12K Flex, 384孔仪器, 笔记本电脑配置	4471081
QuantStudio™ 12K Flex, TAC仪器, 笔记本电脑配置	4471085
QuantStudio™ 12K Flex, OpenArray® 加热模块 (包括AccuFill™ 系统), 台式电脑配置	4471090
QuantStudio™ 12K Flex, OpenArray® 加热模块 (不包括AccuFill™ 系统), 台式电脑配置	4472380
QuantStudio™ 12K Flex, 96孔仪器, 台式电脑配置	4471087
QuantStudio™ 12K Flex, 96孔快速仪器, 台式电脑配置	4471088
QuantStudio™ 12K Flex, 384孔仪器, 台式电脑配置	4471134
QuantStudio™ 12K Flex, TAC仪器, 台式电脑配置	4471089
QuantStudio™ 12K Flex, 96孔加热模块升级版试剂盒	4453543
QuantStudio™ 12K Flex, 96孔快速加热模块升级版试剂盒	4453544
QuantStudio™ 12K Flex, 384孔加热模块升级版试剂盒	4453545
QuantStudio™ 12K Flex, TAC加热模块升级版试剂盒	4453546
OpenArray® 加热模块升级版试剂盒 (AccuFill™系统)	4471067
QuantStudio™ AccuFill™ 系统	4471021
QuantStudio™ 12K Flex AccuFill™ 升级版试剂盒 (针对现有AccuFill™ 系统用户)	4471022
双槽式GeneAmp® PCR系统9700	4428234
双槽式GeneAmp® PCR系统9700, 仅样品模块	4425757
QuantStudio™ 12K Flex, 自动化机器人	4471066

QuantStudio™ 3D数字PCR系统	部件号
QuantStudio™ 3D数字PCR系统包 — 包括:	4482593
QuantStudio™ 3D数字PCR仪	4481097
QuantStudio™ 3D数字PCR芯片加载系统	4482592
QuantStudio™ 3D数字PCR芯片适配器试剂盒 (GeneAmp® PCR系统9700)	4485513
QuantStudio™ 3D数字PCR 20K芯片包 (包括耗材)	4485507
GeneAmp® PCR系统9700, 双槽式加热模块	4428234
QuantStudio™ 3D数字PCR预混液 (1.5mL)	4482710
QuantStudio™ 3D数字PCR系统包 — 包括上述所有产品 (除QuantStudio™ 3D数字PCR芯片加载系统)	4486653
其他产品:	
QuantStudio™ 3D数字PCR预混液 (5mL)	4485718

为您的每一步提供鼎力支持

仪器和服务网页

利用备受赞誉*的免费在线工具，更快速地答复服务或服务询价，并立即与您的同事分享重要的仪器和服务信息。

全方位的全球支持

无论是您目前的订单需要帮助，您要下新的订单，还是想要找到有关产品供货情况的更多信息，请与您当地的客户支持团队联系。

技术支持与培训

如果您在产品选择或使用、分析或试验设计、数据分析或者疑难解决方面存有疑问，请与我们的技术支持科学家团队联系，或者使用我们全方位的在线产品和应用支持工具。

合规性和验证服务

可提供各种审计质量服务，包括安装确认(IQ)、操作确认/仪器性能认证(OQ/IPV)、纯染料校准、现场温度确认、计算机系统验证和风险评估。

如何与我们联系

想要找到您当地的支持或技术支持团队，请登录 lifetechnologies.com/contactus。

有关产品常见问题、实验方案、培训课程和网上研讨会的信息，请登录 lifetechnologies.com/technicalresources。

* 2012 Oracle® fusion Middleware创新奖。仪器与服务门户网站并非在所有地区提供

实时荧光定量PCR系统服务

Applied Biosystems® 服务计划

	AB® 全套	AB® 保证	AB® 维护
维修响应时间(工作日)	下一日保证： 现场维修	2天保证： 现场维修	2天维护： 检修
远程仪器监控和诊断	•	•	
电话和电子邮件优先获取仪器支持	•	•	
电话和电子邮件优先获取应用技术支持	•	•	•



Life Technologies公司

免费服务电话: 800 820 8982 / 400 820 8982

销售服务信箱: sales-cn@lifetech.com

技术咨询信箱: cntechsupport@lifetech.com

上海办事处 电话: 021-61452000

北京办事处 电话: 010-84461800

广州办事处 电话: 020-87609229

成都办事处 电话: 028-86672836

www.lifetechnologies.com