



显微相机

iMG Microscope Camera



苏州英敏基生物技术有限公司



大靶面 高分辨率

大至1"靶面，2000万像素

低噪声 高灵敏度

低至2.5e-读出噪声

真实色彩还原

所见即所得级别色彩还原， $\Delta E < 3$

高帧率




600万像素下最高支持55FPS拍摄

内置大容量图像缓存

1Gb图像缓存，确保传输稳定性


软件功能强大，方便易用

支持景深合成、大图像拼接等功能

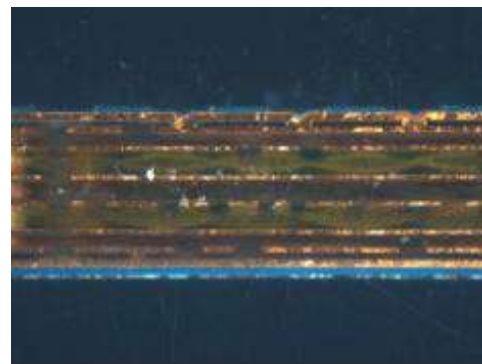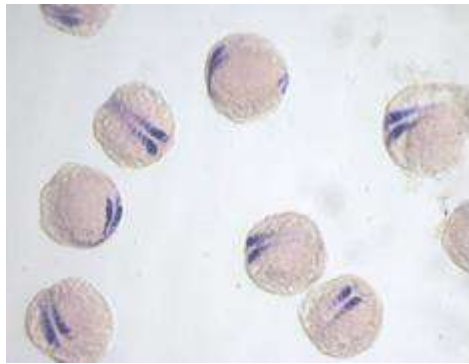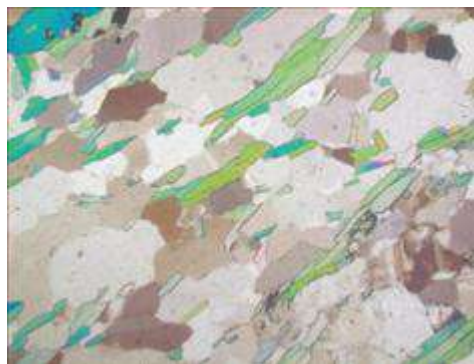


IMG显微相机规格


型号	SC600C	SC1200C
芯片	Sony IMX178	Sony IMX226
芯片尺寸	1/1.8"	1/1.7"
分辨率	3072 × 2048	4000 × 3000
像素尺寸	2.40μm × 2.40μm	1.85μm × 1.85μm
曝光时间	50μs - 10s	50μs - 10s
曝光模式	自动/手动/区域曝光	自动/手动/区域曝光
增益	1 x - 10 x	1 x - 10 x
白平衡控制	自动/区域白平衡	自动/区域白平衡
快门方式	卷帘快门	卷帘快门
彩色/黑白	彩色	彩色
合并模式	1×1, 2×2, 3×3	1×1, 2×2, 3×3
帧率	30FPS@ 3072 × 2048	20FPS@ 4000 × 3000 40FPS@ 2000 × 1500 80FPS@ 1328 × 1000
A/D 转换	12bit	12bit
内置图像缓存	1Gb	1Gb
读出噪声	2.5e-	2.5e-
满阱	15ke-	12ke-
动态范围	76db, 6000:1	74db, 4800:1
QE峰值	67%	67%
镜头接口	C-mount	C-mount
数据接口	USB3.0	USB3.0
供电	USB供电	USB供电
功耗	小于1.8W	小于1.8W
相机尺寸(LxWxH)	80mm x 62mm x 39mm	80mm x 62mm x 39mm
重量	300g	300g
图像格式	RAW / JPG / BMP / PNG / TIF	RAW / JPG / BMP / PNG / TIF
软件接口	DirectShow / TWAIN / ImageJ / μManger / MATLAB / LabVIEW	DirectShow / TWAIN / ImageJ / μManger / MATLAB / LabVIEW

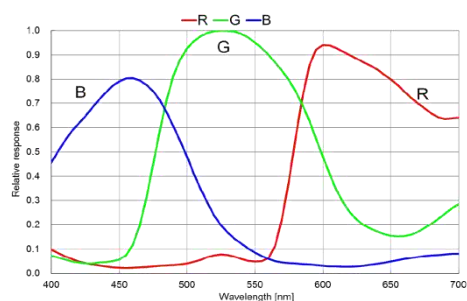

SC600C量子曲线

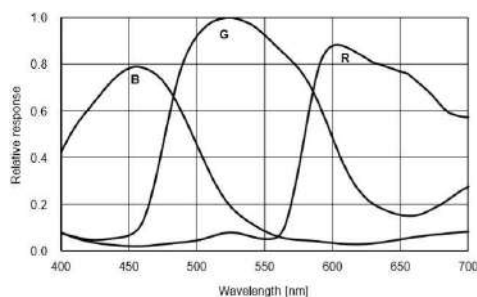


SC1200C量子曲线

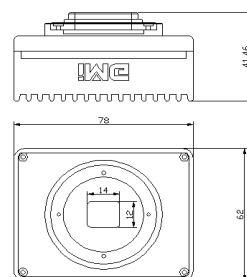


IMG显微相机规格


型号	SC2000C	SC230AC / SC230BC
芯片	Sony IMX183	Sony IMX174
芯片尺寸	1"	1/1.2"
分辨率	5472 × 3648	1920 × 1200
像素尺寸	2.40μm × 2.40μm	5.86μm × 5.86μm
曝光时间	50μs - 10s	50μs - 10s
曝光模式	自动/手动/区域曝光	自动/手动/区域曝光
增益	1 x - 10 x	1 x - 32 x
白平衡控制	自动/区域白平衡	自动/区域白平衡
快门方式	卷帘快门	全局快门
彩色/黑白	彩色	彩色
合并模式	1×1, 2×2, 3×3	1×1
帧率	12.5FPS@ 5472 × 3648 38FPS@ 2736 × 1824 47FPS@ 1824 × 1216	SC230AC 40FPS@ 1920 × 1200 SC230BC 100FPS@ 1920 × 1200
A/D 转换	12bit	12bit
内置图像缓存	1Gb	1Gb
读出噪声	2.7e-	3.5e-
满阱	15ke-	32ke-
动态范围	75db, 5600:1	79db, 9100:1
QE峰值	69%	74%
镜头接口	C-mount	C-mount
数据接口	USB3.0	USB3.0
供电	USB供电	USB供电
功耗	小于1.8W	小于1.8W
相机尺寸(LxWxH)	80mm x 62mm x 39mm	80mm x 62mm x 39mm
重量	300g	300g
图像格式	RAW / JPG / BMP / PNG / TIF	RAW / JPG / BMP / PNG / TIF
软件接口	DirectShow / TWAIN / ImageJ / μManger / MATLAB / LabVIEW	DirectShow / TWAIN / ImageJ / μManger / MATLAB / LabVIEW

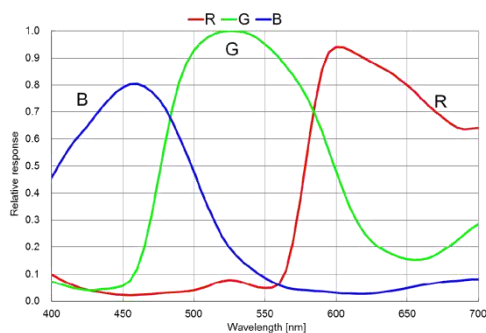

SC2000C量子曲线

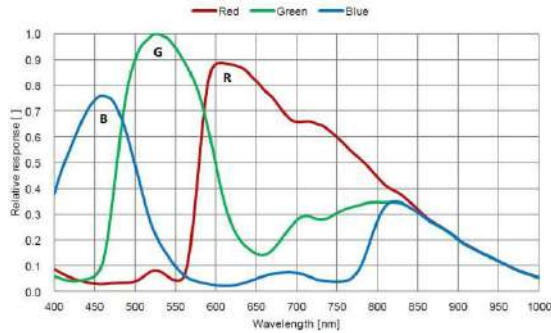

SC230AC/SC230BC量子曲线

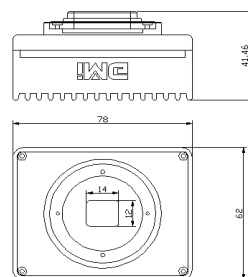



大靶面 高分辨率

大至APS-C(1.8")靶面, 1600万像素

真实色彩还原

所见即所得级别色彩还原, $\Delta E < 3$

低噪声 高灵敏度

低至1.6e-读出噪声

深度制冷

二级TEC制冷, 可达环境温度以下45°C

独立密封舱设计




有效防止相机长时间低温工作时出现结露

内置大容量图像缓存

1Gb图像缓存, 确保传输稳定性




软件功能强大, 方便易用

支持景深合成、荧光反卷积等功能

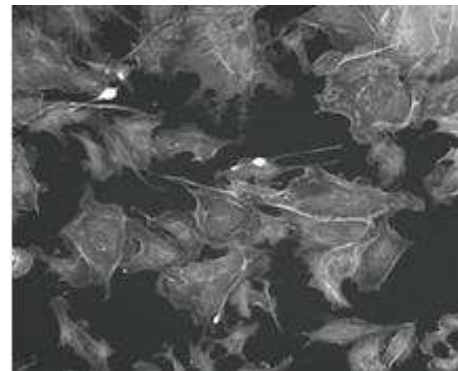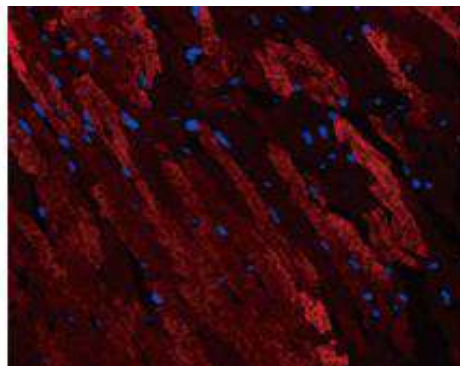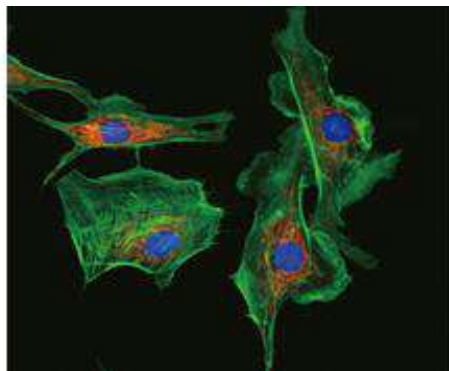

iMG 荧光显微相机规格


型号	SD1600AC/M
芯片	-
芯片尺寸	4/3"
分辨率	4608 × 3456
像素尺寸	3.80μm × 3.80μm
曝光时间	50μs--120s
曝光模式	自动/手动/区域曝光
增益	1 x - 16 x
白/黑平衡	自动/区域白/黑平衡
快门方式	卷帘快门
彩色/黑白	彩色/黑白
合并模式	1×1, 2×2, 3×3
帧率	12.7 FPS@ 4608×3456 26FPS@ 2604×1728 43FPS@ 1536×1152
A/D 转换	12bit
内置图像缓存	1Gb
读出噪声	1.6e-
满阱	19ke-
动态范围	81db, 12000:1
QE峰值	67%
制冷	二级TEC制冷
制冷温度	环境温度以下45℃
数据接口	USB3.0
镜头接口	C-mount
功耗	25W
电压	12V
相机尺寸(LxWxH)	80mm x 80mm x 110mm
重量	1000g
图像格式	RAW / JPG / BMP / PNG / TIF
软件接口	DirectShow / TWAIN / ImageJ / μManger / MATLAB / LabVIEW

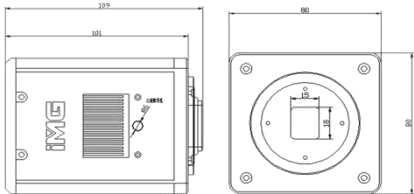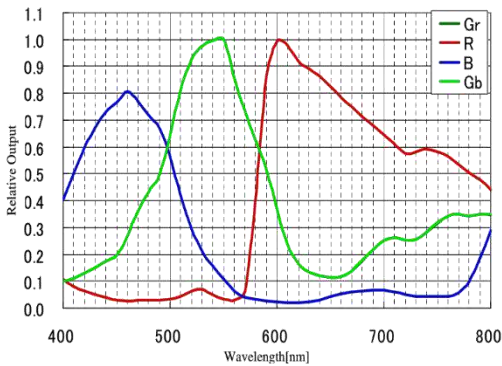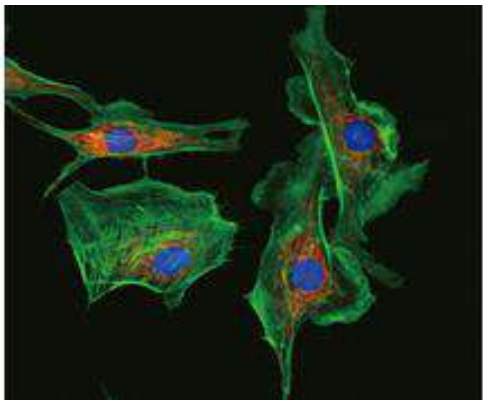


SD1600AC量子曲线

iMG科学级相机规格


型号	SD400AC/M	SD400BM
芯片	GSENSE 2020e	GSENSE 2020BSI
芯片尺寸	1.2"	1.2"
分辨率	2048×2048	2048×2048
像素尺寸	6.5μm×6.5μm	6.5μm×6.5μm
曝光时间	50μs - 120s	50μs - 120s
曝光模式	自动/手动/区域曝光	自动/手动/区域曝光
增益	1× - 64×	1× - 64×
白/黑平衡	自动/区域白/黑平衡	自动/区域白/黑平衡
快门方式	滚动快门	滚动快门
彩色/黑白	彩色/黑白	黑白
合并模式	1×1,2×2,4×4	1×1,2×2,4×4
帧率	42FPS@2048×2048	38FPS@2048×2048
A/D 转换	12bit	12bit
内置图像缓存	2Gb	2Gb
读出噪声	2e-	1.2e-
满阱	45ke-	54ke-
动态范围	87dB, 22500:1	93dB, 45000:1
QE峰值	72%	95%
制冷	二级TEC制冷	二级TEC制冷
制冷温度	环境温度以下40℃	环境温度以下40℃
数据接口	USB3.0	USB3.0
镜头接口	C-mount	C-mount
功耗	25W	25W
电压	12V	12V
相机尺寸(LxWxH)	85mm×85mm×115mm	85mm×85mm×115mm
重量	1000g	1000g
图像格式	RAW / JPG / BMP / PNG / TIF	RAW / JPG / BMP / PNG / TIF
软件接口	DirectShow / TWAIN / ImageJ / μManger / MATLAB / LabVIEW	DirectShow / TWAIN / ImageJ / μManger / MATLAB / LabVIEW

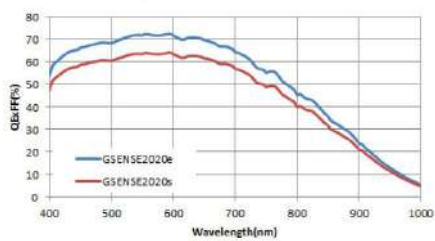

SD400AC/M量子曲线

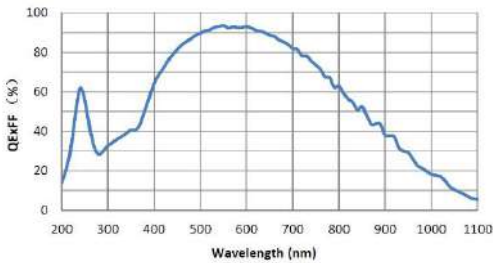


SD400BM量子曲线

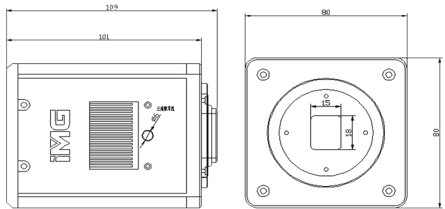


极简风格 功能丰富

极简的界面设计使核心功能一目了然，用户无需系统学习即可快速上手。同时，用户还能选取所需要的高级功能，自由定制界面。

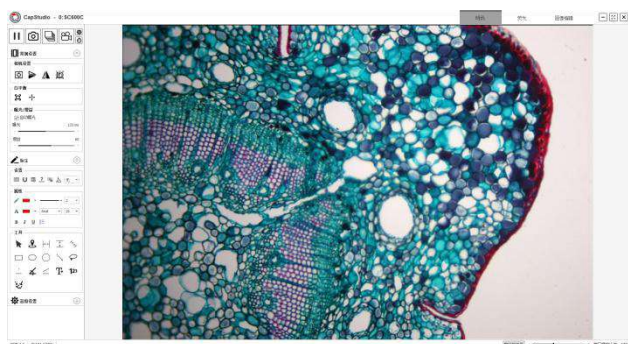

针对不同应用场景进行优化

针对明场/荧光/金相等应用场景分别提供不同的操作界面和成像优化，更贴合实际使用环境。

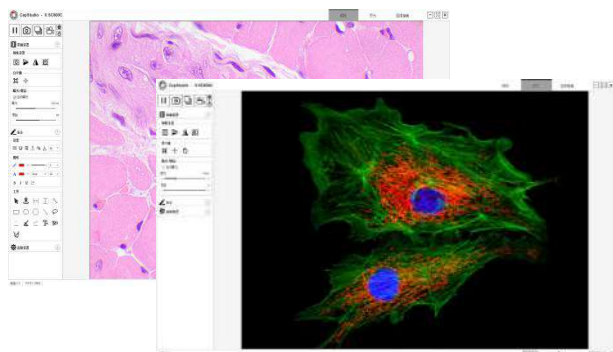


多样化的拍摄/测量/报告生成功能

支持单拍/定时连拍/摄像，定标与各类测量，生成报告并导出至Word/Excel文档，整合全部工作流程，节省操作时间。

一键白/黑平衡

无需繁琐的人工调节，真正的一键精确色彩还原。下图为一键白平衡对比图。

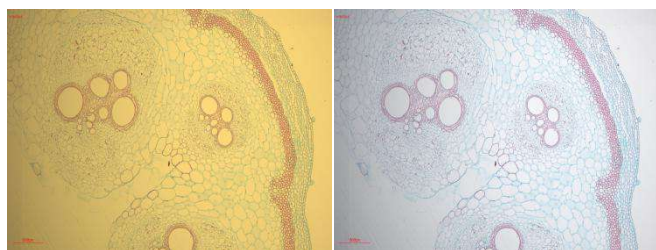


大图像拼接

用户只需移动载物台即可进行实时大图自动拼接，扩展有限的物镜视野。



荧光多通道合成

专业的荧光多通道合成功能，方便用户进行高质量和高效率的荧光成像与分析。

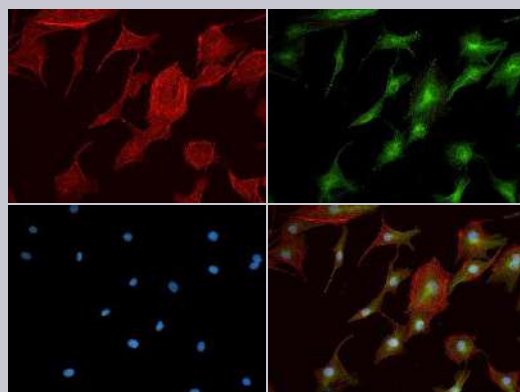

景深合成

景深合成可以将因景深不足而局部模糊的多张图像，合成全部清晰的一张图像。下图为合成前后的效果对比。

