


DEPArrayTM PLUS



全新单个细胞分辨率精度的
稀有细胞分离平台

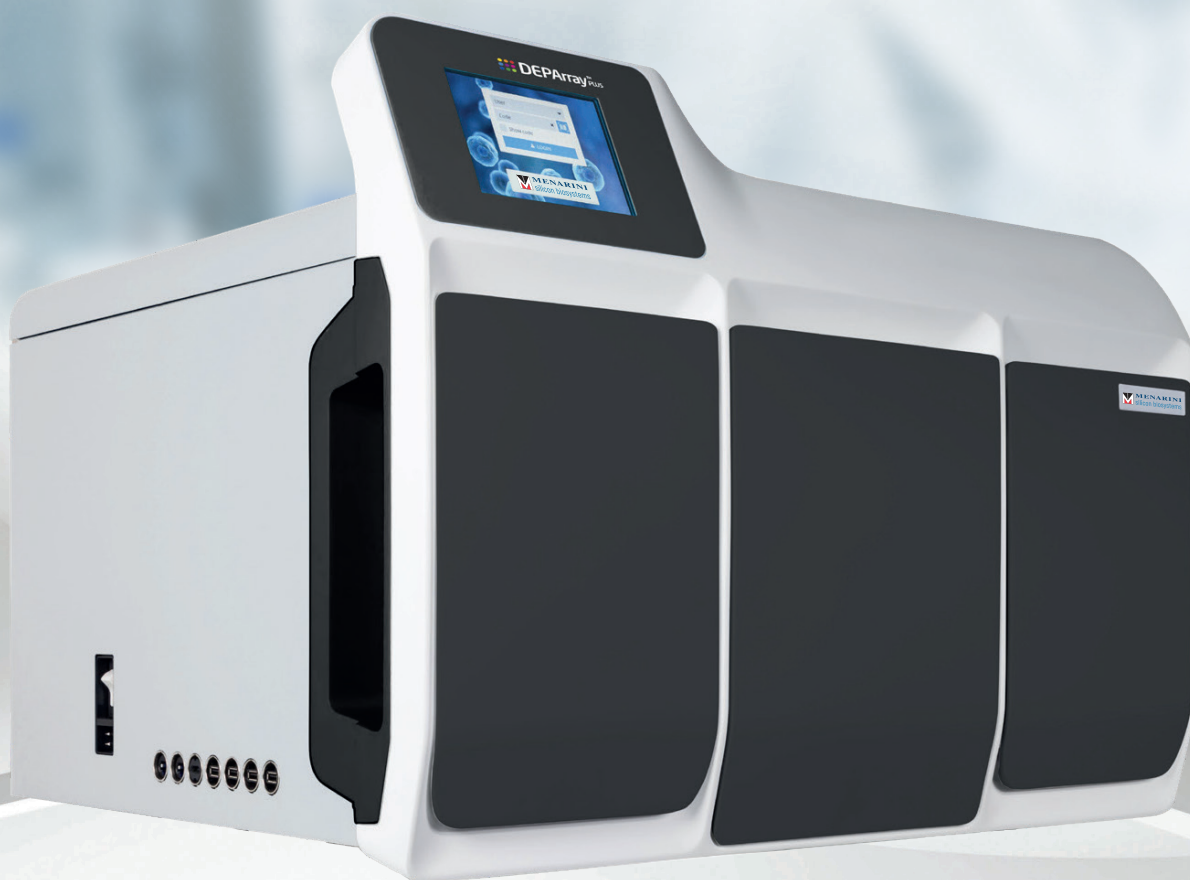

siliconbiosystems.com




MENARINI
silicon biosystems



DEPArray™ PLUS 是一种全自动，基于电子影像的单细胞分选设备，它可以辅助临床和病理研究专家在单细胞分辨率下鉴定和分离稀有细胞。

■ 系统组成

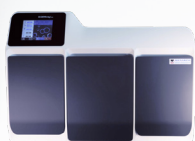

DEPArray™ PLUS具有9个荧光通道，是一种可以分选目标细胞类群或者单个细胞的完美工具。



DEPArray™ 芯片盒结合了微流控和微电子技术，可以在单细胞清晰度下柔性分选目标细胞。
在自动化分析细胞图像和单细胞选择后，目标细胞可以被收集到不同的复苏孔室。



CellBrowser™ software可实现自动化或实验员手动挑选目标细胞。

DEPArray™ PLUS的高清晰度成像允许软件利用算法自动化分选目标细胞。

■ 得您所寻，单细胞水平 - 100% 纯度

DEPArray™ PLUS 提供的软件许可证可以按照不同的应用场景分别安装。

液体活检

CTCs 应用

允许在全血中以单细胞分辨率富集目标细胞。

组织活检

FFPE 应用

可以在不用考虑肿瘤组织大小和纯度下分析 FFPE 样本的单细胞组成。

司法检验

司法应用

允许在混合的生物样本中分辨单细胞清晰度下的司法证据。

DEPArray™ PLUS 是一种可以满足各种类型的科研需求的独特工具，它可以为下游分子生物学鉴定提供无以伦比的单细胞分辨率。

■ 产品特征

灵活性 适用于不同的起始样品。


自动化 完美对接CellSearch工作流程。

多功能 允许切换预设的或者个性化protocols.

动态化 适用更多荧光通道 (可达9荧光通道).

智能化 客户手机端及时反馈样品进展信息


■ 对接CELLSEARCH® CTC 应用全流程展示

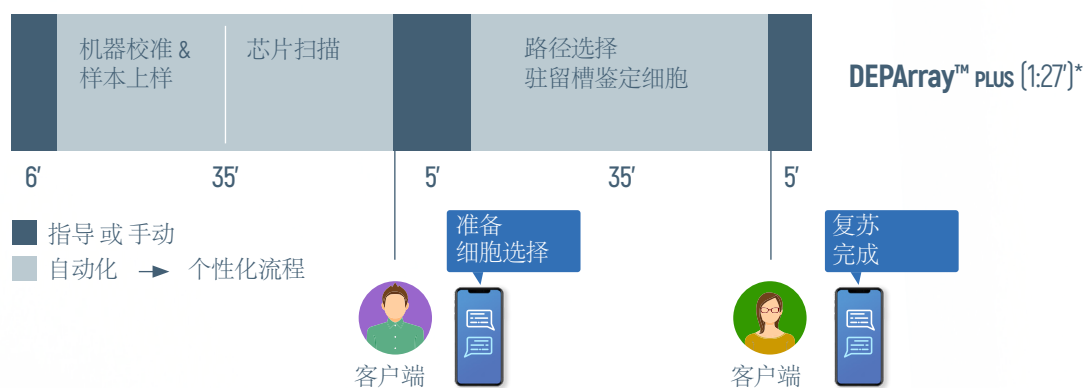

*9 个肿瘤细胞 + 10 个白细胞的分选时间

全流程特征

- 可用细胞的自动化预分选。
- 实时仪器支持，无需用户全程跟进。
- 客户智能化手机信息提示操作。

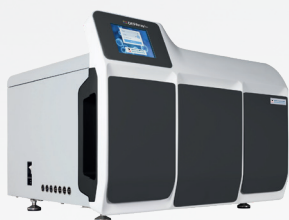

技术参数

单细胞清晰度	用户可以选择30,000 DEP电泳笼的谱式去收集单细胞并以100%纯度复苏它们
分选时间	接近50分钟开始第一次复苏需要参考: - 包括明场在内的 4 通道成像 - 约 1000 固定细胞组成的样本 - 路径选择默认选择 100 个细胞 使用DEPArray™ PLUS芯片盒做后续单细胞复苏时间: - 每60 秒可获得下一个细胞 (基于80%以上 Cellsearch CTC试剂盒制备的样本。)
光学设置	图像清晰度: 2 464 x 2 056 像素 光学清晰度: 1 像素 = 0.345 μm x 0.345 μm
分辨率	低至1个完整细胞
尺寸	外部显示器除外: 宽度: 80 cm [31.5"] 深度: 68 cm [26.8"] 高度: 61.6 cm [24.3"]
间隙	前端: 约 300 mm [12"], 后端: 约 90 mm [3.5"], 侧端: 约 200 mm [8"]
重量	100 kg (220.5 lb)
电源规格	100-240 V AC / 50-60 Hz. 随附连接电线
外部设备	1. 显示器: 全高清分辨率显示器(1920 x 1200). HDMI 2. 键盘: 拉丁字符 3. 鼠标: 标准
操作系统	嵌入式Linux。Windows在虚拟机上运行
光学参数	光的强度: 高性能LED光源 明场 DAPI [Ex 377/54 BP, Em T (avg) > 90% 417-477 nm] VIOLET-FITC [Ex 377/54 BP, Em T (avg) > 90% 499-529 nm] VIOLET-ORANGE [Ex 377/54 BP, Em T (avg) > 90% 603-627 nm] FITC [Ex 470/33 BP, Em T (avg) > 90% 499-529 nm] PE [Ex 549/21 BP, Em T (avg) > 90% 572-594 nm] PE-FARRED [Ex 549/21 BP, Em T (avg) > 90% 754-816 nm] APC [Ex 623/40 BP, Em T (avg) > 90% 661.5-690.5 nm] APC-Cy5.5 [Ex 623/40 BP, Em T (avg) > 93% 690-730 nm] APC-FARRED [Ex 623/40 BP, Em T (avg) > 90% 754-816 nm] PerCP-Cy5.5 [Ex 438/29 BP, Em T (avg) > 93% 690-730 nm] [Ex = 激发光; Em = 发射光; (中心波长)/(半峰全宽) in nm, BP = 带通; T (avg) = 平均发射率和波长]

订购信息

产品编号	描述
DA0750	DEPArray™ PLUS 设备
DA0180	DEPArray™ PLUS 工作站
DA0185	DEPArray™ PLUS 本地多任务工作站
DA0751	DEPArray™ PLUS 芯片盒 1 PC
DA0752	DEPArray™ PLUS 芯片盒 5 PCs

获得完整软件许可，请联系当地销售。

