


pE-300 系列

荧光显微镜光源

一系列用于荧光成像, 光遗传学, 电生理学和其他高速应用的LED照明系统 适用于荧光成像、光遗传学领域、电生理学领域和其他高速应用的LED照明系统。


LED光源的寿命更长

传统光源的亮度会随着使用而降低, 这意味着照明效果会随着时间大打折扣。LED光源的寿命远远长过传统光源, 且亮度在使用期间能够保持基本恒定, 为用户提供稳定、可重复的照明。

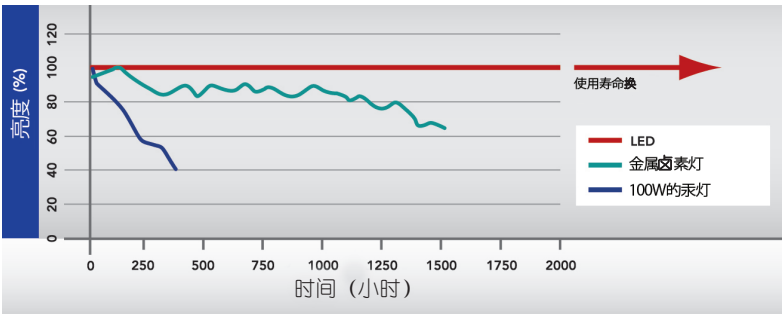

pE-300 荧光系列

pE-300 激发的部分荧光基团

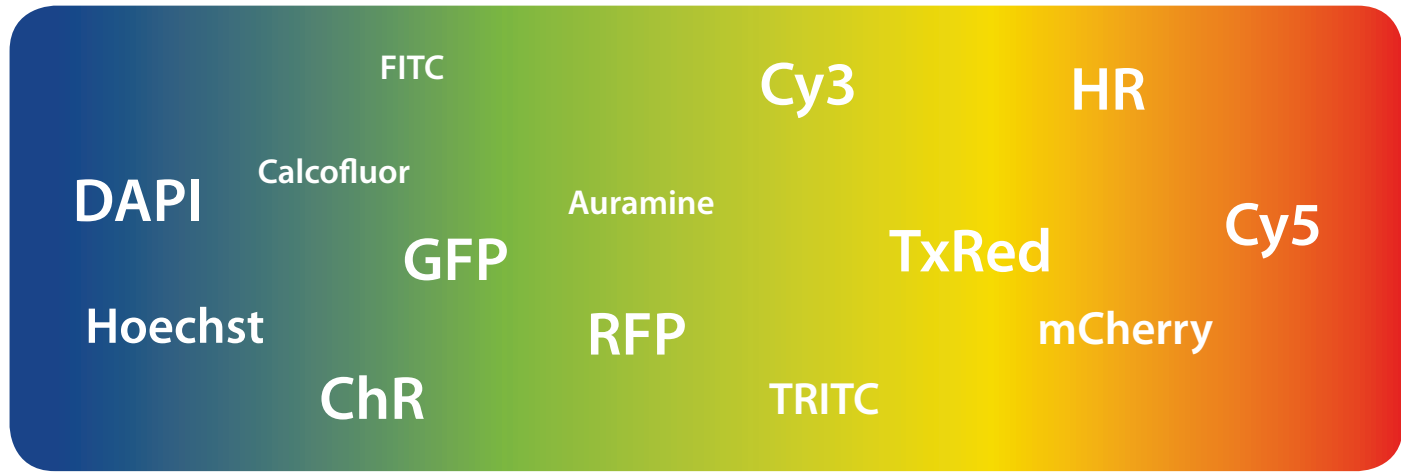

pE-300^{lite} - 简单的白光光源

pE-300^{lite} 专为市面上的主流荧光显微镜而设计, 装置紧凑, 价格实惠, 适宜各种用途。

购买方便: 为日常的荧光团研究提供照明, 例如DAPI、FITC、TRITC和Cy5, 符合常规的实验室耗材预算。

安装简便: 可直接安装至显微镜的落射荧光端口, 简单调整后, 便可优化显微镜光源, 一步到位。

使用简单: 即时开关, 可通过桌面控制终端优化亮度, 减少样本损伤。

pE-300^{lite}: 简单的白光——易于购买、安装和使用。



pE-300^{white} - 日常可控照明

pE-300^{white}为显微镜光源提供了更多控制选项。

三通道控制终端可以选择并控制激发波长: 不论是平衡FITC与TRITC, 或者通过仅激活当前使用的荧光标记来最大限度地减少整个样品的漂白。此光源适配常见的显微成像软件, 可与成像系统集成, 重复使用。

pE-300^{white}的另一个优点是可以观察单个或多个染色剂, 无需切换荧光滤片, 简化多色荧光样品扫描, 是多波段荧光滤光片组的理想搭配。三个LED通道均可单独控制, 用户可以在多色荧光样品上独立控制每种荧光染色剂的激发强度, 无需设置单波段滤光片组。

pE-300^{ultra} - 高速可控的照明

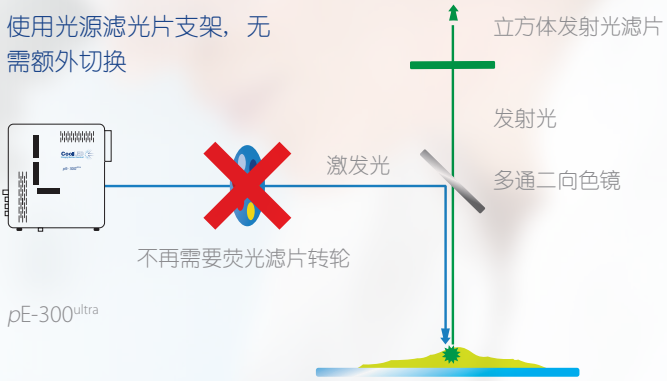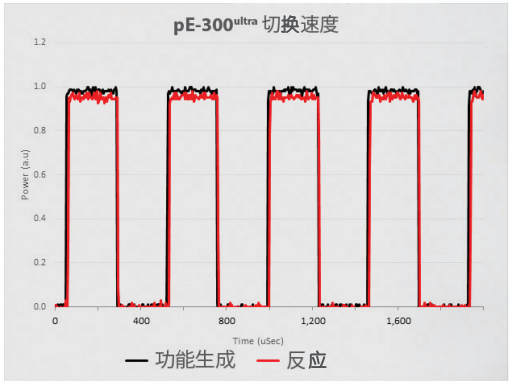

pE-300^{ultra}是pE-300系列中可控性最高的产品。在pE-300^{lite}和pE-300^{white}的功能基础上, pE-300^{ultra}还可以精确控制波长、亮度和开关。目前为止, 市面上只有像CoolLED pE-4000此类高端型号才具有这些功能。

触发多重TTL输入以及在光源内安装激发滤光片的设计, 使得这款光源具有高速切换预滤激发光的能力, 速度可达微秒级。与目前市面上的高性能多波段荧光滤片组配合使用, 可替代传统上使用白光源和滤光片完成的成像实验。此光源具有LED的所有优点, 并且价格经济实惠。



pE-300^{ultra}的一个实用之处是CoolLED特有的多通道激发模式下的序列运行设置功能。用户可以使用pE-300^{ultra} 控制终端设置荧光团激发的顺序, pE-300^{ultra}光源可以接受来自显微镜相机的单个TTL输出信号, 并启动随后的激发通道。此功能也可以单独在光源上的单个通道上应用, 方便用户使用仅具有单个TTL输出的相机实现序列激发试验。

产品特点	pE-300 ^{lite}	pE-300 ^{white}	pE-300 ^{ultra}
宽光谱	🔄	🔄	🔄
即装即用	🔄	🔄	🔄
即时开关功能	🔄	🔄	🔄
无需更换灯泡	🔄	🔄	🔄
直接照明或通过导光管	🔄	🔄	🔄
光源寿命长	🔄	🔄	🔄
稳定/可重复性高——0-100%亮度调节	🔄	🔄	🔄
滤光片兼容	🔄	🔄	🔄
无汞环保产品	🔄	🔄	🔄
单独通道光强度调节		🔄	🔄
单独通道选择		🔄	🔄
集成成像软件		🔄	🔄
整体触发控制 (TTL, 微秒级别)		🔄	🔄
单个通道触发控制 (TTL, 微秒级别)			🔄
内置可更换的滤光片支架			🔄
序列运行设置			🔄

规格
性能：

功率

功率

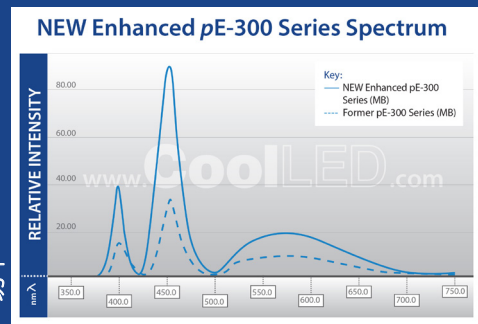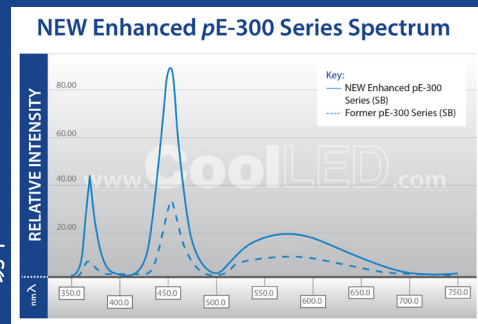

订购信息

pE-300-LT-D-SB-YYY-ZZ: pE-300^{lite}照明系统。即装即用的单波段滤片配置。配件包含光源、控制终端、电源、YYY转接环和ZZ插头。

pE-300-LT-D-MB-YYY-ZZ: pE-300^{lite}照明系统。即装即用的单波段滤片配置。配件包含光源、控制终端、电源、YYY转接环和ZZ插头。

pE-300-LT-L-SB-ZZ: pE-300^{lite}照明系统。与3mm液体导光管搭配使用，多波段滤片配置。配件包含光源、控制终端、电源和ZZ插头。

pE-300-LT-L-MB-ZZ: pE-300^{lite}照明系统。与3mm液体导光管搭配使用，多波段滤片配置。配件包含光源、控制终端、电源和ZZ插头。

pE-300-W-D-SB-YYY-ZZ: pE-300^{white}照明系统。即装即用的单波段滤片配置。配件包含光源、控制终端、电源、YYY转接环和ZZ插头。

pE-300-W-D-MB-YYY-ZZ: pE-300^{white}照明系统。即装即用的多波段滤片配置。配件包含光源、控制终端、电源、YYY转接环和ZZ插头。

pE-300-W-L-SB-ZZ: pE-300^{white}照明系统。与3mm液体导光管搭配使用，单波段滤片配置。配件包含光源、控制终端、电源和ZZ插头。

pE-300-W-L-MB-ZZ: pE-300^{white}照明系统。与3mm液体导光管搭配使用，多波段滤片配置。配件包含光源、控制终端、电源和ZZ插头。

环境与安全

LED产品比传统照明器更具可持续性和能效。CoolLED的产品具有以下优点：

- 无汞，非激光
- 节能：功耗降低80%
- 寿命长
- 无需更换灯泡
- 降低眼睛损伤的风险
- 无噪操作
- 无特殊的废物处置规定或问题
- 已获ACT标签



外形尺寸

光源：77mm (宽) x 186mm (长) x 162mm (高) 重量1.40Kg

控制面板：88mm (宽) x 125mm (长) x 37mm (高) 重量0.32Kg

电源：167mm (宽) x 67mm (长) x 35mm (高) 重量0.62Kg

pE-300-UT-D-SB-YYY-ZZ: pE-300^{ultra}照明系统。即装即用的单波段滤片配置。配件包含光源、控制终端、三个激发滤片支架 (直径25mm)、电源、YYY转接环和ZZ插头。

pE-300-UT-D-MB-YYY-ZZ: pE-300^{ultra}照明系统。即装即用的多波段滤片配置。配件包含光源、控制终端、三个激发滤片支架 (直径25mm)、电源、YYY转接环和ZZ插头。

pE-300 UT-L-SB-ZZ: pE-300^{ultra}照明系统。与3mm液体导光管搭配使用，单波段滤片配置。配件包含光源、控制终端、三个激发滤片支架 (直径25mm)、电源、YYY转接环和ZZ插头。

pE-300 UT-L-MB-ZZ: pE-300^{ultra}照明系统。与3mm液体导光管搭配使用，多波段滤片配置。配件包含光源、控制终端、三个激发滤片支架 (直径25mm)、电源、YYY转接环和ZZ插头。

pE-1906: 长1.5m, 直径3mm的液体导光管
pE-10400-YYY: 通用平行光管和客户指定的转接头型号要指定显微镜适配器 (YYY)，请参阅适配器

请登录官网，查看具体适配的转接环 (YYY) 型号 (<http://www.cooled.com/product-detail/adaptors-2/>) 电源线 (ZZ) 型号：10 = 澳大利亚，20 = 欧洲，30 = 英国，40 = 美国

保修承诺：整机保修：36个月
LED保修：36个月

控制方式和操作界面

手动控制：手动控制终端
远程控制：pE-300^{white}通过总体TTL控制。全功率<20μs，pE-300^{ultra}通过总体通道和单独通道的TTL控制。全功率<20μs。
连接方式：pE-300^{white}和pE-300^{ultra}通过USB (B型) 进行成像软件控制
序列运行设置：pE-300^{ultra}单TTL输入用户设定的序列。全功率 <20μs

功率

电源要求：100-240VAC, 50. 60Hz, 1.4A
能量消耗：待机最大2W
1 带 (GYR) 在100%强度下最大20W
2 条带 (BLU和GYR) 在100%强度下最大38W。白色 (所有3个条带)，100%强度最大46W

pE-300 系列 荧光显微镜光源



适用于荧光成像、光遗传学领域、电生理学领域和其他高速应用的LED照明系统

CoolLED
高效 便捷 可控

